

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

製造番号

 Lourdes

MEDICAL HUG PILLOW

管理医療機器：家庭用電位治療器
ルルド メディカルハグピロー
品番 AX-BNL806



目次

△ 安全上のご注意	1～3	🔧 故障かなと思ったら	8
🔍 梱包内容と各部の名称	4	🗑️ 廃棄について	9
👤 使いかた	5～6	⚙️ 仕様	10
🧼 お手入れ	7	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙
📦 保管について	8		

このたびはAX-BNL806をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

⚠️ 安全上のご注意

ご使用前には必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。
お読みになった後は必ず大切に保管しておいてください。

警告表示の意味	表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。
 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

 **禁止を促す記号**

 **強制を促す記号**

⚠️ 危険



次のような医用電気機器と併用しないでください。

- ・ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
 - ・心電計などの装着形の医用電気機器
- 医用電気機器が誤作動することがあり危険です。

心臓病と診断された方や、日常の過激な運動を制限されている方は使用しないでください。
事故の原因になります。

⚠️ 警告



本製品は充電式電池を内蔵しています。

火中投入、加熱、高温・低温下での充電、使用、放置をしないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。

症状について



次の方は医師と相談して使用してください。

- ・急性疾患の方
- ・悪性腫瘍のある方
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
例1：急性炎症症状【けん(倦)怠感、寒寒、血圧変動など】の強い時期
例2：衰弱しているとき
- ・心臓に障害のある方
- ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方
- ・安静を必要とする方
- ・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の方
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・高血圧の方
- ・不整脈のある方
- ・睡眠時無呼吸症の方
- ・ぜん(喘)息の方
- ・その他、医師の診断を受けている方や体に異常を感じている方



子供には使用させない(保護者、医師又は専門家の監督下で使用する場合は除く)、本体の上へのせたり、遊ばせたりしないでください。
事故の原因になります。

-  身体の自由が利かない方及び乳幼児には使用させないでください。
事故の原因になります。
-  使用中に身体に異常が表れたり、感じたときは使用を直ちに中止し、医師に相談してください。
本器を使用しても症状の改善や効果が表れない場合は、医師又は専門家に相談してください。

ご使用について

-  他の治療器と同時に使用しないでください。
急激な刺激を受けたり、体調を損なう原因になります。
本品には付属の外カバー以外使用しないでください。
事故、故障の原因になります。
金属繊維などの導電性物質を含む布団や衣類とともに使用しないでください。
事故の原因になります。
-  機器に故障が発見された場合には、直ちに使用を中止して電源を切ってください。
事故・やけどの原因になります。

電源について

-  電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みや充電口がゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
-  お手入れの際は必ずACアダプターを本体から抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。
ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体や端子部分を持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。
充電時以外はACアダプターをコンセントや本体から抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。また、付属のACアダプターは他の商品には使用しないでください。

MODEL No. GQ07-050100-DJ

火災や故障の原因になります。

異常(故障)について

-  故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

その他

-  改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。

⚠ 安全上のご注意

⚠ 注意

ご使用について



浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。

故障の原因になります。

本体や外カバーが濡れている状態で使用しないでください。

事故・故障の原因になります。

本器は一人用機器であり、複数の人が同時に使用しないでください。

事故の原因になります。

本来の目的以外の用途には使用しないでください。

故障の原因になります。

本体を傷つける、破損させる、折り曲げる、折りたたむなどはしないでください。

事故・故障の原因になります。



1日の使用は8時間を超えないでください。

体調不良の原因になります。

取扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意を厳守してください。

事故・故障の原因になります。

ご使用前に、各スイッチ、タイマーなどが正常に作動するか確認してください。

事故の原因になります。

本体に液体などをこぼした場合はそのまま使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

しばらく使用しなかった場合、各操作が正常かつ安全に作動することを確認してください。

事故の原因になります。

その他



3ヶ月に一度は充電放電を行ってください。

長時間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充電電池の故障の原因になります。

🔍 梱包内容と各部の名称




梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください

- 本体
- 外カバー
- ACアダプター


各部の名称

本体

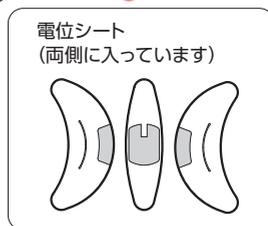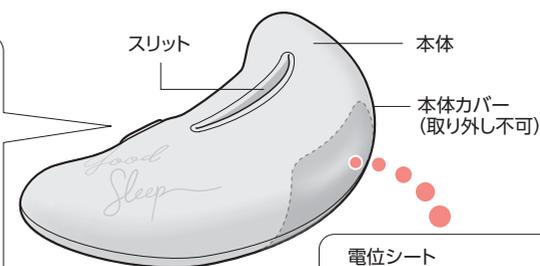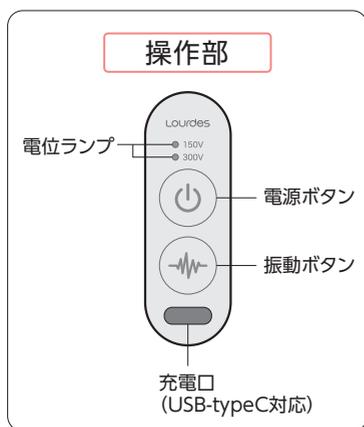


付属品

外カバー (取り外し可)

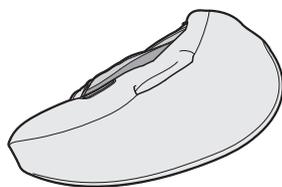


外カバーの付けかた ➡ P.7

絶縁シート

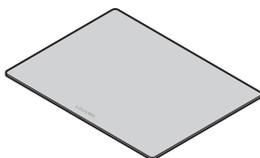


絶縁シートの使い方 ➡ P.6

ACアダプター (充電用)

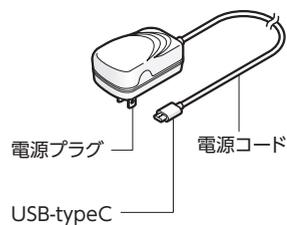

ご使用前の準備

充電する

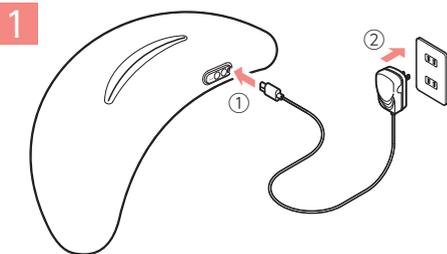

ACアダプターをつなぐ

①ACアダプターのUSB端子を本体の充電口に差し込みます。

②ACアダプターをコンセントに差し込みます。
・まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

2



充電を開始する

2つの電位ランプが緑色で点滅します。
ランプの点滅が点灯に変わると充電が完了です。

- 約3.5時間の満充電で、合計約6時間使用できます。
- ※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。
- ※周囲温度が高温/低温の中では充電時に保護装置が働くことがあります。常温で充電してください。
- ※使い始めや長時間使用しなかった時は満充電してください。
- ※充電中は使用できません。

電位治療を行う

電位治療器について

電位とはマイナスやプラスの電荷を持つエネルギーのことで、電位のある空間を「電界」と呼びます。電位治療器は、人体に電位を与えて治療する機器のことです。

ルルド メディカルハグピローは「頭痛」「肩こり」「不眠症」および「慢性便秘」の緩解を目的に、一般家庭での使用が認められている家庭用医療機器です。

使用目的又は効果

頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解。一般家庭で使用すること。

●不眠症の緩解



●頭痛の緩解



●肩こりの緩解





●慢性便秘の緩解



1 電源ボタン を押す

- ・電位ランプが点灯して、-150Vで電位治療を開始します。
- ※電位治療開始から約2時間経過すると自動オフタイマーが働き、自動的に停止します。
- ・電源ボタン  を押すたびにモードが「-150Vモード」→「-300Vモード」→「電源OFF」と切り替わります。
- ・電池の残量が少なくなると、使用中に2つのランプが点滅します。充電してください。

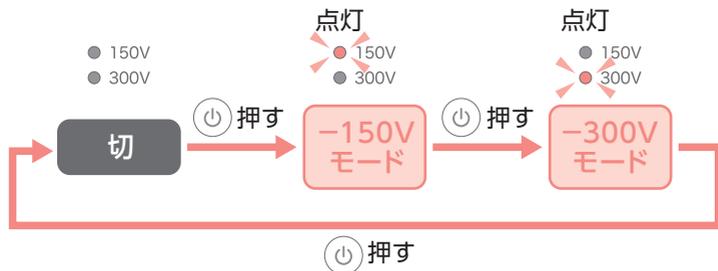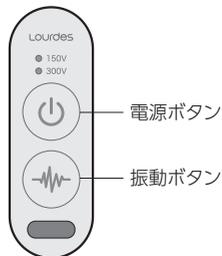

2 振動モードを使う

- 振動ボタン  を押すと本体が振動し、電位治療中をお知らせします。
- ※振動開始から約5分経過すると自動オフタイマーが働き、自動的に停止します。
- 振動ボタン  を押すたびに振動の「ON」⇔「OFF」を切り替えます。

振動モード

4秒間振動→3秒間止まる…をくり返します。

3 本体を抱えて体にあてる

- ・床面上ではなくベッドや布団、ソファや椅子の上でお使いください。(身体を絶縁状態に置くため)
- ・本体の電位シート部をできるだけ身体に近づけるように抱えます。
- ・本体にあるスリットは、手を差し込んでお使いいただけます。

【使用例】


横たわる



座る



絶縁シートの使い方

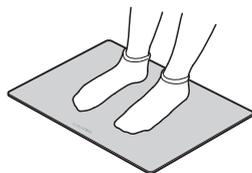

床に足をつけてご使用になるときは、絶縁シートを敷いてください。
(身体を絶縁状態に置くため)

お手入れ


警告

●必ず電源が「切」の状態ですべてACアダプターを充電口から抜いて行ってください。

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ（金属部分）をから拭きをしてください。
（絶縁劣化防止のため）
- 3ヶ月に一度を目安で充電してください。
（長期間充電しないと、充電機の機能低下・故障の原因となります。）


外カバーの付けかた

本体の汚れが気になるかたは、付属の外カバーを付けてご使用いただけます。

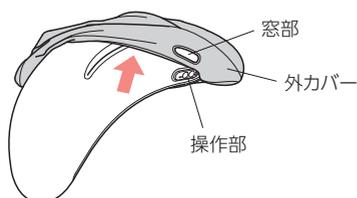

1 外カバーのファスナーを開き 本体にかぶせる


外カバーの窓部を本体の操作部に合わせます。

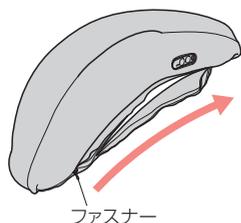

2 外カバーのしわを伸ばし、 ファスナーを閉じる

外カバーのお手入れ方法

外カバーは取外して洗濯できます。

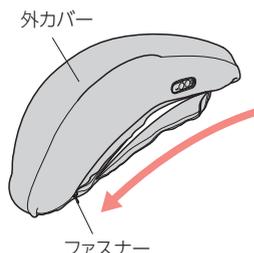

1 外カバーのファスナーを開けて、 本体からはずす

2 外カバーに縫い付けてある品質表 示タグの洗濯絵表示に従い洗う

3 しわをのぼし形を整えてから、 日陰に干す

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 保管の際は、製品に異常がないか定期的に点検してください。
- 長期間ご使用にならないときは、フル充電の状態、できるだけ常温(10℃～30℃)で保管ください。
- コード類はねじれをほどいて保管ください。
- お使いにならない場合でも、3ヶ月に一度の目安で充電してください。
(長期間の放置は、充電電池の機能低下や故障の原因となります。)

故障かなと思ったら

修理に出す前に以下についてももう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

電源が入らない 動かない	充電が不十分、または充電が切れていませんか？ P.5を参考に正しく充電してください。
	充電中ではありませんか？ 充電中は使用できません。USBケーブルを抜いてください。
振動が弱い	充電が不十分ではありませんか？ P.5を参考に正しく充電してください
充電できない	充電開始まで時間がかかることがあります。 すぐにランプが点滅しない場合でも、そのままの状態です約10分間充電を続けてください。ランプ点滅が始まります。
	長期間保管し電池が放電しきっていませんか？ 完全放電すると使用できませんので3ヶ月に1度は充電してください。
使用中に 電位ランプが点滅する	充電が不足しています。充電してください。
振動時に異音がある	振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。
電話やラジオに 雑音が入る	まれに雑音が入ることがありますが、その時は本品を移動させるか電源を切ってください。
電位が感じられない	電位治療器は身体を電界の中に置いて使うもので、人体への感覚がほとんどないと言われています。 効果には個人差がありますが、継続してお使いいただくことをお勧めします。

■リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い



Li-ion00

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。本製品を廃棄する時は、お住まいの市区町村の指示に従ってください。

- 廃棄するときは、電池を分解しないでください。
- 本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。

■リチウムイオン電池の取り出しかた


製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

⚠️ 警告

下記の手順は、製品を破棄するためのものであり修理用のものではありません。ご自分で分解した場合、機能が維持できず、故障または事故の原因になります。

- 充電残量がある場合は、電池を使い切ってください。
- ハサミ、ドライバー、ニッパーを用い、次の手順で分解してください。

- ① 本体カバー・ウレタンフォームをハサミで切る
- ② ウレタンフォームの中から円弧状の白い樹脂ケースを取り出す
- ③ 樹脂ケースから4本のネジを外す
- ④ 充電電池ケースふたから2本のネジを外す
- ⑤ 充電電池のコードをニッパーで切断する
- ⑥ 充電電池ケースから充電電池を取り外す

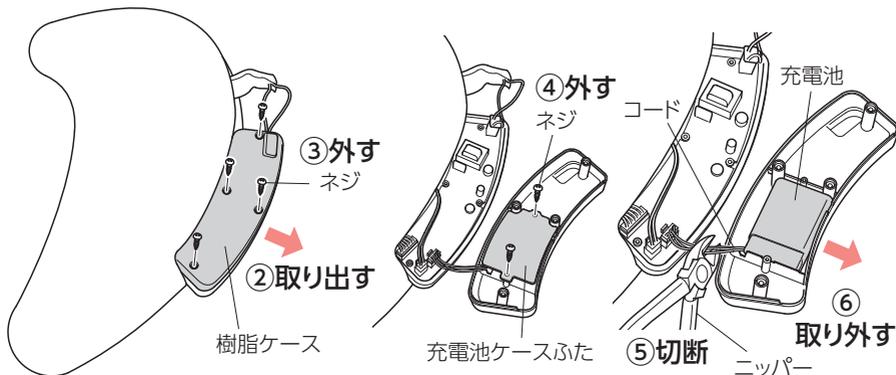

- 取り出した電池は、⊕と⊖の端子をショートさせないように、コネクタの端子部にテープを貼り絶縁してください。その後リチウムイオン電池のリサイクル協力店などで回収を依頼してください。

類別	機械器具78 家庭用電気治療器
管理区分	管理医療機器
一般名称	家庭用電位治療器(70987000)
販売名	ルルド メディカルハグピロー
商品番号	AX-BNL806
使用目的または効能	頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解 一般家庭で使用すること
電気定格	DC5V/1A (充電時)、DC3.7V/0.2A (動作時)
ACアダプター定格	入力：AC100V 50/60Hz 0.3A 出力：DC5V 1.0A
出力電圧	DC-150V、DC-300V
タイマー	電位治療：約2時間、振動モード：約5分
製品サイズ	(約) W550×L265×H140 (mm)
製品重量	本体：約1kg
素材	本体表地：ポリエステル95%・ポリウレタン5% 本体中材：ウレタンフォーム (低反発)、基板ケース：ABS樹脂 操作部：シリコンゴム、外カバー：品質表示タグ参照 絶縁シート：熱可塑性エラストマー
内蔵電池	リチウムイオン電池 (2000mAh)
充電所要時間	約3.5時間
連続使用時間	約6時間
生産国	中国
製造業者	U Young Appliance Manufacturing(Xiamen) Co., Ltd.(中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス
医療機器認証番号	304AABZX00077000

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド メディカルハグピロー」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス
〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	ルルド メディカルハグピロー / AX-BNL806		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上日より1年 本体
* お客様	お名前	* 販売店	
	ご住所		
	TEL: () -		

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 株式会社アテックス
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは

 カスタマーサービス
0120-486-505

受付時間 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)