

お手入れと保管方法

- 汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用し、最後に洗剤分はよく拭き取ってください。
- シンナー・ベンジン等は使用しないでください。
- 保管は直射日光等、高温・多湿な場所は避けてください。
- ご使用後は1ヶ月程度で各部のボルトのゆるみを点検し、しっかり締め直してください。その後は定期的（3ヶ月）に点検してください。

仕様

商品名	ベッドサイドテーブル	品番	AX-BT19
製品サイズ	(約)W900×L420×H660~910(mm)	表面加工	本体：粉体焼付塗装、めっき(クロム)
天板サイズ	(約)W900×L400(mm)		
天板高さ	(約)W660×L910(mm)	重量	(約)12.5kg
素材	本体：鋼	耐荷重	10kg以下
	天板：MDF(合成樹脂化粧繊維板 PVC樹脂貼り)	生産国	中国

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼される場合は保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ベッドサイドテーブル」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品はその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記までお問い合わせください。

保証書		本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。		 株式会社アテックス <small>〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24 TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118</small>	
品名 / 型番	ベッドサイドテーブル / AX-BT19				
お買上げ年月日*	年	月	日	保証期間	お買上げ日より1年 本体
*お客様 お名前 ご住所 TEL:() -	様			*販売店	*欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。
1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。 ・取扱上の不注意、誤った使用方法 ・天災、火災などによる故障または損傷 ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など ・保存上の不備 ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造 ・本製品本来の使用目的以外の使用 ・一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷		2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。 3 無料保証期間はご購入の日から3カ月です。 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。 5 保証書の再発行はいたしません。 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。 7 本書は日本国内においてのみ有効です。 8 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。			

 **株式会社アテックス**
http://www.atex-net.co.jp/

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは

フリーダイヤル
 **0120-48-6505**
 カスタマーサービス課

※携帯・PHS・IP電話からは TEL.06-6799-8109 へおかけください。

受付時間 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

BT19-01-150622

ATEX

製造番号

組立・取扱説明書

保証書付

保管用

ベッドサイドテーブル AX-BT19

このたびはAX-BT19をお買上げいただき、誠にありがとうございます。組立て・ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。



安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

 **禁止を促す記号**
禁止

 **強制を促す記号**
必ず守る

注意

 **分解禁止** 本製品を絶対に改造したり分解・修理をしないでください。事故やけがの原因になります。

 **禁止** テーブルの上に乗らないでください。また、歩行器や手すりなどの目的で使用しないでください。転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形するおそれがあります。

 **禁止** 天板部には10kg以上の物は置かないでください。転倒し、事故やけがの原因になります。

 **禁止** 物を載せた状態でテーブルの移動や高さ調節をしないでください。物が落下して事故やけがの原因になります。

 **必ず守る** 組立時は、フローリング(木製床)などにキズが付かないよう、十分注意して組み立ててください。事故やけがの原因になります。

 **必ず守る** 組立中に手や指を傷つけることのないように十分気をつけてください。できれば手袋などをしてください。事故やけがの原因になります。

 **必ず守る** 本製品は平らな場所でご使用ください。思わぬ事故やけがの原因になります。

 **禁止** ●本製品は一般家庭用です。絶対に業務用としては使用しないでください。


●天板に加熱した鍋や湯沸かし器などを置かないでください。変質・変形・発火の原因になります。

●可動部や可動部付近には触れないでください。また、異物などを挿入しないでください。

●取扱説明書、警告ラベルの内容が理解できない方には使用させないでください。
●機械油など油成分や科学薬品などの成分が浮遊している場所では使用しないでください。
●浴室など湿気の高い水のかかる場所では使用しないでください。


組立完成図と各部の名称

●組み立てる前に完成図をよく見て、あらかじめ把握しておいてください。

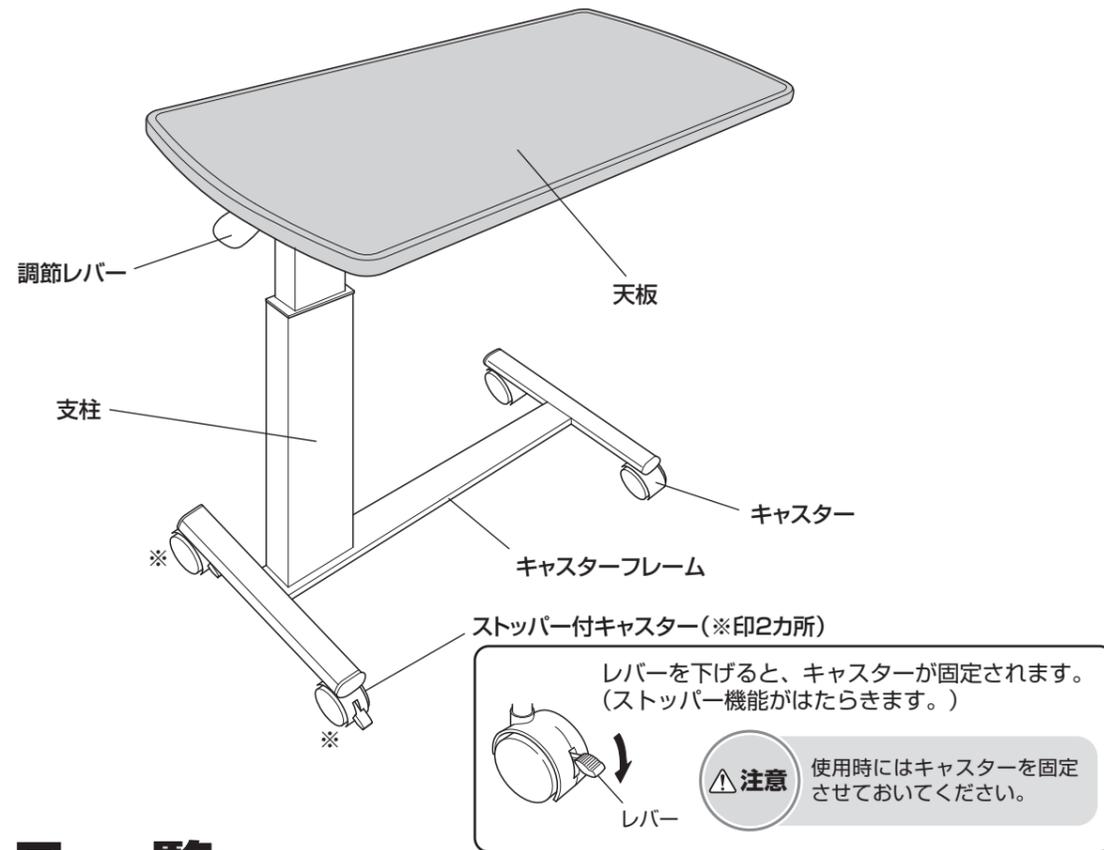

部品一覧

●組立前に部品がすべて揃っているか、確認してください。

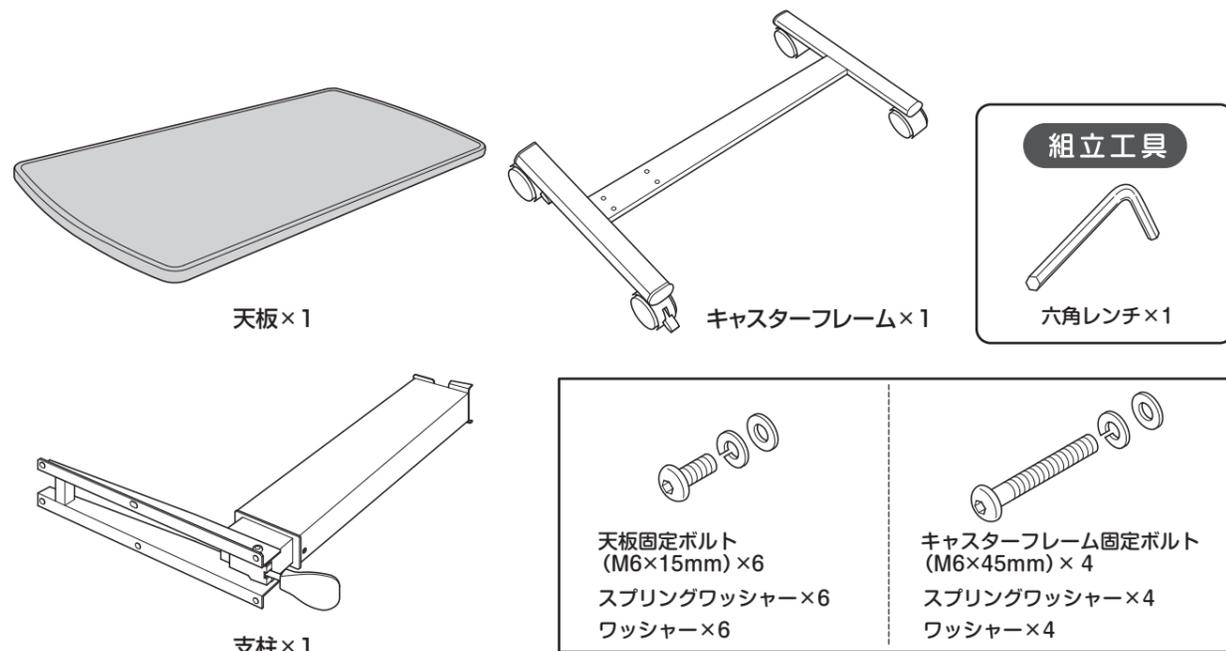

組立順序

組立を始める前に…

- 組立時は、商品やフローリング(木製床)等にキズがつかないように、ダンボールケースの上で行ってください。
- 組立中に手や指を傷つけないように十分気を付けてください。できれば手袋などをしてください。
- 組立時は、常に左右のバランスを考えて、一方に力が掛かりすぎることのないように注意してください。
- ボルトは、はじめからきつく締めないで、仮止めしておき、全て組み上がった後に再度しっかりと締め直してください。
(最初から締め付けてしまいますと、次のボルトが合いにくくなります。)


STEP 1 天板を裏返して支柱を天板に取り付けます

STEP 2 キャスターフレームを支柱に取り付けます

POINT

最後に、各部のネジをしっかりと締め直してください。

STEP 3 本体をひっくり返せば完成です

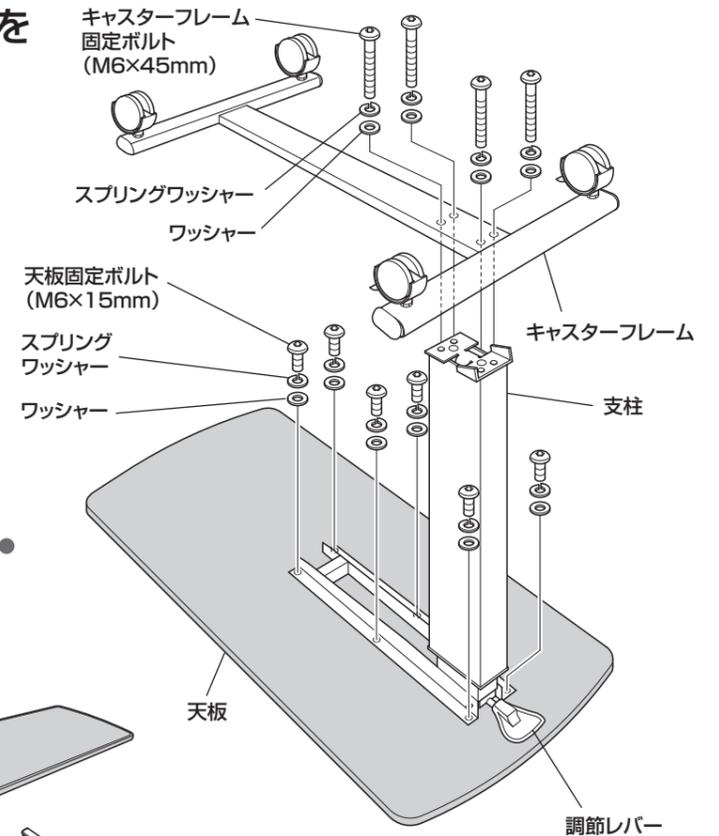

高さ調節のしかた

調節方法

- ・調節レバーを上方向へ持ち上げると、天板が上昇します。
- ・天板を下降させる場合は、調節レバーを持ち上げながら天板を押し下げます。

