

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド エアもみマッサージソファ」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

 株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番		ルルド エアもみマッサージソファ / AX-CL1632	
お買上げ年月日*		年 月 日	保証期間 お買上げ日より1年 本体
★お客様	お名前		★販売店
	ご住所		
TEL:() -			

★欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは

 株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

<http://www.atex-net.co.jp/>

フリーダイヤル



カスタマーサービス課

0120-48-6505

受付時間 平日9:00～17:00（土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

ATEX

製造番号

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

医療機器認証番号：224AKBZX00029000

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器

ルルド エアもみマッサージソファ AX-CL1632

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名称とはたらき	4
ご使用前の準備	5～7
コントローラーの使いかた	8
クッションについて	9
保管について	10
お手入れ	10
故障かなと思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	裏表紙



AIR MOMI
Massage SOFA

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

このたびはAX-CL1632をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号



警告



禁止

次の人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。
・医師からマッサージを禁じられている人
例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症



禁止

幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。



禁止

使用前にマッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。
破れている場合は使用しないでください。



分解禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。



禁止

頭部には使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。



禁止

ソファ使いやマッサージ以外の用途に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底にコードを踏んだ状態で使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
事故やけがの原因になります。



禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。



禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

治療部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

次のような人は必ず医師とご相談の上で使用してください。
事故や健康を害するおそれがあります。
・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している人
・温度感覚喪失が認められる人
・悪性腫瘍のある人
・心臓に障害のある人
・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
・背骨に異常のある人や曲がっている人
・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
・皮膚に創傷のある人
・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
・体温38℃以上(有熱期)の人
例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
・その他、医療機関で治療中の人

仕様

類別	機械器具77 パイプレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード 34662000)
販売名	ルルド エアもみマッサージソファ
商品番号	AX-CL1632
医療機器認証番号	224AKBZX00029000
使用目的・効能または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。
電気定格	AC100V 50/60Hz 37W (ヒーター5W)
アダプター定格	入力 AC100V (50/60Hz) 1500mA 出力 DC12V 3.5A
タイマー	約15分自動オフ
製品サイズ	(約) W630 × L650~850 × H710~610 (mm)
座面サイズ	(約) W380 × L450 × H350 (mm)
製品重量	約19kg
素材	本体 構造部材: 金属(鋼)、合板 表面加工: 金属部 エポキシ樹脂塗装 クッション材: ウレタンフォーム、鋼製ばね 張り材: 品質表示タグ参照 クッション クッション材: ポリエステル 張り材: 品質表示タグ参照
もみ玉の回転数	約35回/分
エア圧力	約85kPa
もみ玉の移動速度	約0.7cm/秒
ヒーターの温度	55℃以下
生産国	中国
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売元	株式会社 アテックス

保管について

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように汚れやほこりを取った後、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- 商品を移動させるときは必ず2人で商品を持ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

お手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きしてください。(絶縁劣化防止のため)

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。
	背もたれと本体のコネクターをつないでいますか？ コネクターをつないでください。(⇒P6 STEP2参照)
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか？ 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 電源ボタンを押し、再度コントローラーを操作してください。
	電源ボタンを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。 電源ボタンを押し、再度コントローラーを操作してください。
異音がする 音が大きい	マッサージの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

- ❗ 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。
- ❗ 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。
- ❗ 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に連絡してください。
事故やけがの原因になります。
- ❗ 停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電やけがの原因になります。
- ❗ 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
火災やけがの原因になります。
- ❗ この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用してください。
低温火傷のおそれがあります。
- ❗ 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故やけがのおそれがあります。

⚠ 注意

- ❗ 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。
- ❗ 本体の座、背、肘部の上に立ったりしないでください。
故障や事故の原因になります。
- ❗ 座面に勢いよく腰を下ろしたりしないでください。
事故やけがのおそれがあります。
- ❗ 本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
- ❗ 使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。
- ❗ リクライニングした背もたれや肘部には乗らないでください。
商品の破損や転倒して事故の原因になります。

- ❗ この商品は一人用です。
複数の人が同時に使用しないでください。
故障や事故の原因になります。
- ❗ 組立前の状態で使用しないでください。
組立前のご使用は故障や事故の原因になります。
- ❗ 背もたれと本体座部・肘部の間に手や脚を入れないでください。
事故やけがのおそれがあります。
- ❗ 1回の使用は15分以内にしてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
- ❗ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。
- ❗ 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
- ❗ 畳の上や柔らかいフローリングの上で使用する場合はラグなどを敷いてください。
床材の変形の原因になります。

- ❗ 付属品のACアダプターは指定されたものを使用してください。


MODEL No. YJS060A-1203500D

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。


- ❗ 移動させるときは、二人で運んでください。
事故やけがのおそれがあります。
- ❗ 水平な場所で使用してください。
商品の破損や、転倒して事故の原因になります。
- ❗ 初めてご使用の際は、弱の設定からご使用ください。
事故やけがのおそれがあります。

各部の名称とはたらき

本体

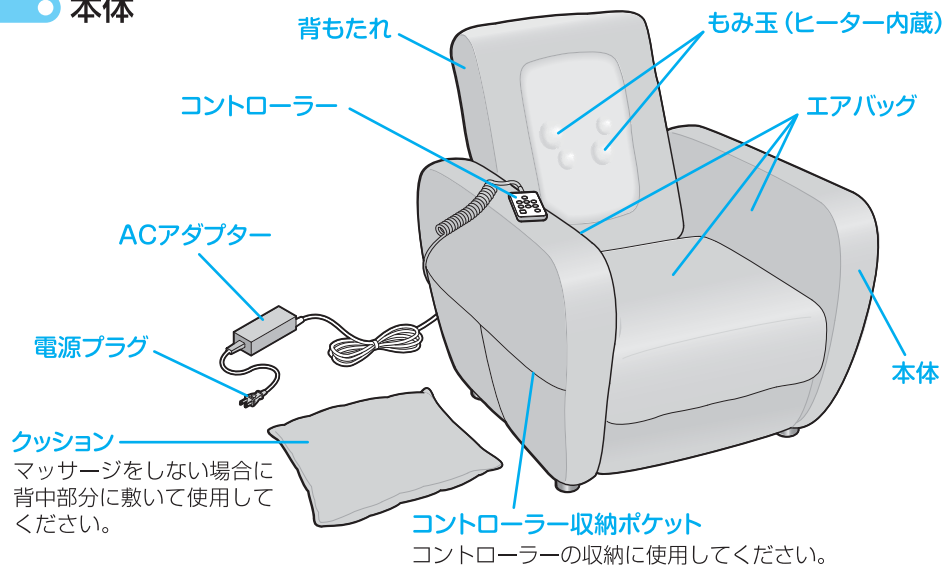

コントローラー

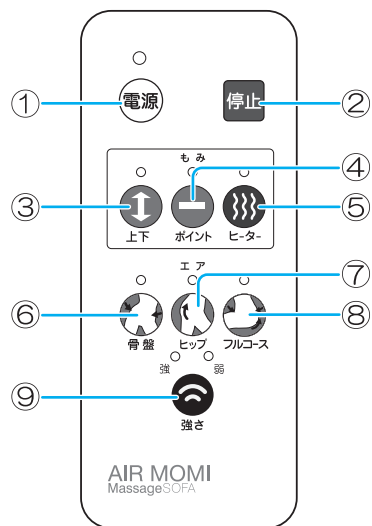


- ① **電源ボタン**
電源の入／切をします。
- ② **停止ボタン**
その場で全ての動作が停止します。
- ③ **上下ボタン**
もみ玉が回転しながら上下移動します。
- ④ **ポイントボタン**
もみ玉がその場で止まりながら回転し続けます。
- ⑤ **ヒーターボタン**
もみ玉のヒーターが動作します。
- ⑥ **骨盤ボタン**
骨盤まわりと太ももを中心にエアマッサージが動作します。
- ⑦ **ヒップボタン**
おしりを中心にエアマッサージが動作します。
- ⑧ **フルコースボタン**
骨盤まわりと太ももとおしりのエアマッサージが動作します。
- ⑨ **強さボタン**
エアマッサージの強弱を調節します。

クッションについて

お好みでクッションを使用する


マッサージをしない場合に使用してください。

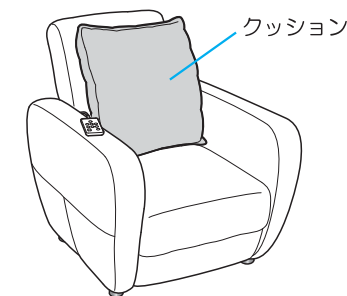

内部クッションの外しかた

クッションカバーは内部のクッションを外して洗濯することができます。

STEP 1 ファスナーを開く

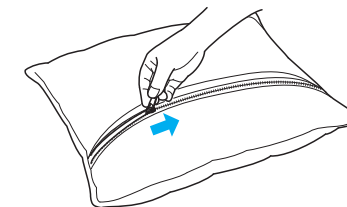

STEP 2 中のクッション部分を取り出す

内部クッションを出したクッションカバーを洗濯表示に従って洗濯してください。
元に戻すときは逆の手順で行ってください。



コントローラーの使いかた

使用を開始する

電源を押す

ランプが点灯し、電源が入ります。

もみモードで使う

STEP 1 ↑を押す

上下

ランプが点灯し、背部のもみ玉が回転しながら上下移動し、マッサージを行います。
動作を停止するときは、もう一度↑を押します。

STEP 2 ーを押す

ポイント

ランプが点灯し、背部のもみ玉が回転しながら上下移動せずに、定位置でマッサージを行います。
動作を停止するときは、もう一度ーを押します。

STEP 3 〰を押す

ヒーター

ランプが点灯し、もみ玉に内蔵されたヒーターが動作します。
ヒーターの動作を停止するときは、もう一度〰を押します。

※ヒーターはもみ玉が停止中は点灯しません。

エアモードで使う

STEP 1 骨盤を押す

骨盤

ランプが点灯し、主に骨盤左右のエアバッグがふくらみ、骨盤まわりと太ももを押しながらマッサージを行います。

STEP 2 ヒップを押す

ヒップ

ランプが点灯し、主に座部のエアバッグがふくらみ、おしりを押し上げながらマッサージを行います。

STEP 3 フルコースを押す

フルコース

ランプが点灯し、骨盤左右のエアバッグと座部のエアバッグが交互にふくらみ、骨盤まわり・太ももとおしりを交互に押しながらマッサージを行います。

STEP 4 強さを押す

強さ

骨盤左右のエアバッグと座部のエアバッグの強・弱を設定します。

注意

- 初めてご使用の際は、弱の設定からご使用ください。
- 痛いと感じたら停止ボタンを押して、すぐにマッサージを中止してください。

使用を終了する

電源を押す

ランプが点滅しながら、もみ玉が初期位置に戻ったあと動作が停止し、電源が切れます。
ACアダプターをコンセントから外しておいてください。

停止ボタンについて

緊急時や動作中に異常を感じたときは、を押してください。その場で全ての動作が停止します。

安全確認後、電源を押してください。

再び、使用可能になります。

タイマーについて

マッサージを開始してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。

ご使用前の準備

梱包内容

本体

背もたれ

クッション

ACアダプター




注意

使用前の注意事項

- 使用前にマッサージ部の縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前に電源ボタンや、停止ボタンなど各ボタン、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。


マッサージ部

縫製破れがないか確認してください。

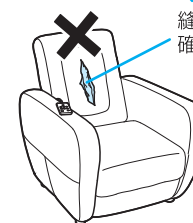

STEP 1 背もたれを本体に差し込む

背もたれの前後を確認してから、背もたれの左右のストッパー金具の溝に本体のツメを合わせて、左右同時に最後まで差し込んでください。

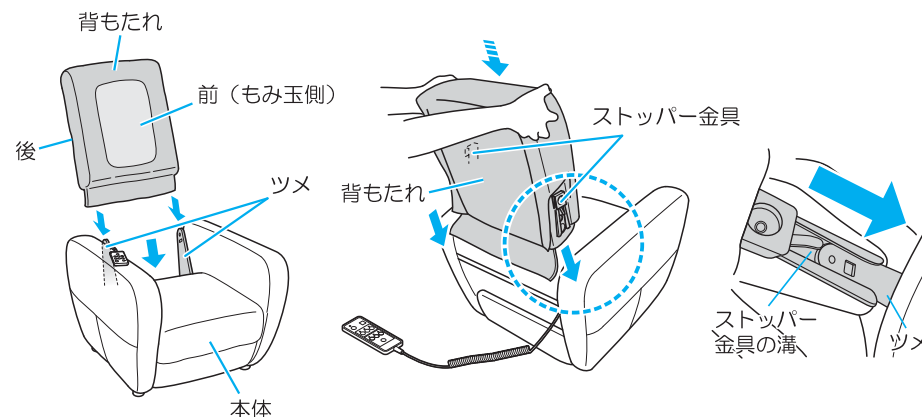

注意

- 本体ツメが背もたれ左右のストッパー金具の溝に合っているか確認しながら作業し、無理に押し込まないでください。
- 背もたれは、最後まで確実に差し込んでください。
- 本体ツメや背もたれ左右のストッパー金具等の金属部に指をはさまないよう十分注意して作業してください。
- 組立て時、背もたれと本体の間にコントローラーをはさまないように注意してください。


STEP
2

背もたれのコネクターと本体のコネクターをつなぐ


背もたれのコネクターと本体のコネクターの矢印の向きを合わせて、まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。
リングを回して固定してください。

⚠ 注意 ・しっかり差し込まれていない場合、もみ玉が動作しないことがあります。

<本体背面>

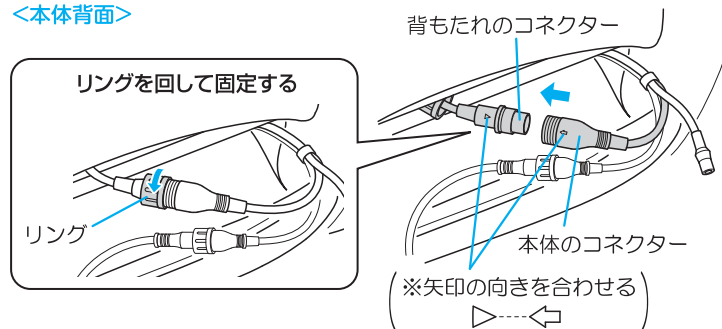
STEP
3

背もたれ後部の生地をファスナーで止める

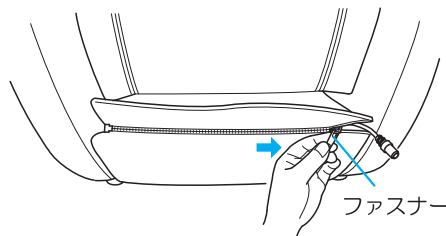STEP
4


ACアダプター接続コネクターにACアダプタージャックをつなぐ

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

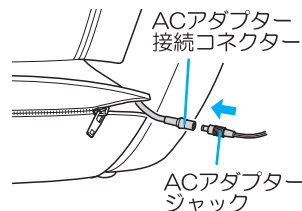STEP
5


ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む

正しく確実に差し込んでください。

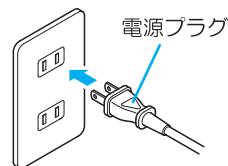


リクライニングのしかた

背もたれは、3段階にリクライニングすることができます。
お好みの角度に調節してお使いください。

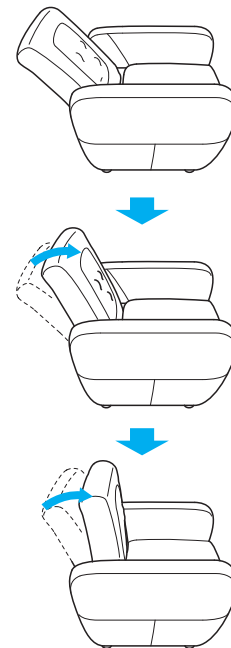

リクライニングを解除するときは、90度以上前方へ倒し、ロックを解除します。

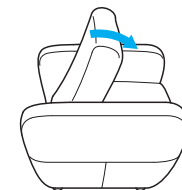

⚠ 注意

- ・エアモードで動作中は、エアバッグがふくらんでいるため、ロック解除はできません。電源ボタンまたは停止ボタンを押して動作を停止させてから、ロック解除を行ってください。
- ・転倒防止のため、使い終わったら背もたれは起こしてください。

背もたれの外しかた

間違っって片側の金具だけが差し込まれた場合は、下記の要領で背もたれを外してください。


⚠ 注意

- ・必ず電源プラグをコンセントから外して、作業してください。


STEP
1

背もたれのコネクターと本体のコネクターを外す

リングを回して外してから、コネクター同士を外してください。

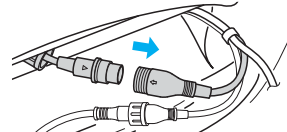STEP
2

本体と背もたれの連結部(両側)に背面から⊖ドライバーを差し込む

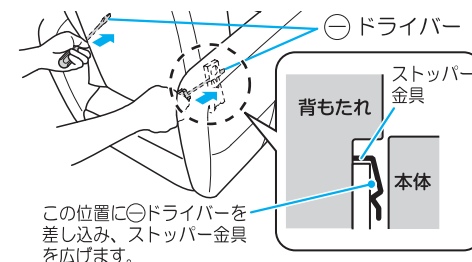STEP
3

背もたれのストッパー金具を⊖ドライバーで広げた状態で本体を押さながら背もたれを持ち上げて、取り外す



⚠ 注意

- ・⊖ドライバーで、背もたれや本体の布部を傷付けないよう十分注意してください。
- ・本体ツメや背もたれ左右のストッパー金具などの金属部に指をはさまないよう、十分注意して作業してください。