

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

製造番号

ATEX TOR

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器
ハンドケア リュクス P14

品番

AX-HP314
AX-HP315



ハンドケア リュクス

目次

⚠ 安全上のご注意	1～4	📦 保管について	9
🗂 梱包内容と各部の名称	5	🔧 故障かなと思ったら	10
👤 使いかた	6～8	⚙️ 仕様	10
🧼 お手入れ	9	💖 保証とアフターサービス	11

このたびはアテックス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

*デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制を促す記号

⚠ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・ 悪性腫瘍のある人
- ・ 心臓に障害のある人
- ・ 温度感覚喪失が認められる人
- ・ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・ 糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・ 皮膚に創傷のある人
- ・ 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・ 骨粗しょう症の人、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・ 体温38℃以上 (有熱期) の人
例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・ その他、医療機関で治療中の人
- ・ けんしょう (腱鞘) 炎の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

事故や健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児やお子様を使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。

使用前にカバー破れが無いか確認し、破れている場合は使用を中止してください。カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。お買い上げの販売店または「カスタマーサービス 11ページ参照」に相談してください。事故やけがの原因になります。

マッサージ以外の用途に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。

使用時には周辺にアクセサリーや装飾ネイルなど硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけがのおそれがあります。

手のマッサージ以外の目的で使用しないでください。けい部(首)へ使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

低温やけどをおすすめおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・布団などをかけての使用
- ・熱すぎると感じた場合の使用
- ・ストーブなど暖房器具の近くでの使用

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いの自覚症状がなくても低温やけどになるおそれがあります。

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。

電源について



コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。




お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。

電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
火災やけがの原因になります。

安全上のご注意

警告

電源について(つづき)

-  ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。



MODEL No. SW-0799

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

異常(故障)について

-  緊急時や動作中に異常を感じたら、直ちにACアダプタープラグを本体から抜いてください。事故やけがの原因になります。

その他

-  改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。火災・感電・けがの原因になります。
-  本製品は家庭用です。病院等での治療用機器ではありませんのでご注意ください。事故やけがの原因になります。



注意

ご使用について



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。

本体内部が高温になる可能性があります。

この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

手を入れたまま、商品を動かさないでください。

事故やけがのおそれがあります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

エアバッグに故意に力を加えて無理に止めないでください。

けがや故障の原因になります。

本製品は片手用です。両手を入れて使用しないでください。

事故やけがの原因になります。



使用時間は1回10分以内にしてください。連続しての使用はお避けください。

【おねがい】1日の使用は30分以内にしてください

初めて使用する人や、使い慣れるまでは強さ：弱の弱い刺激で使用してください。

強い刺激のままで使用を続けると、健康を害するおそれがあります。

梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください


- 本体
- ACアダプター

各部の名称とはたらき


本体

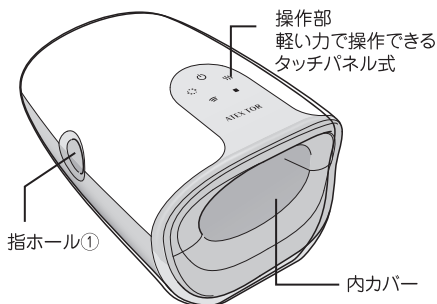


ACアダプター

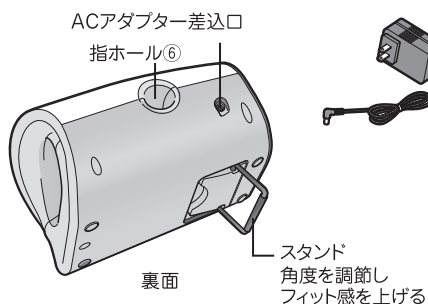

エアバッグともみ玉(本体中)

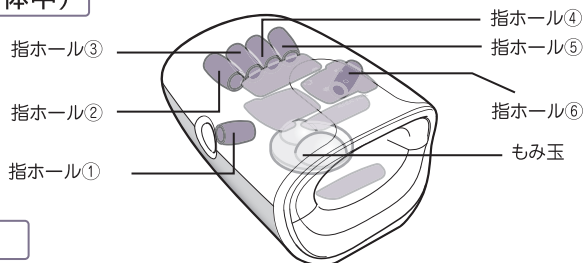


操作部

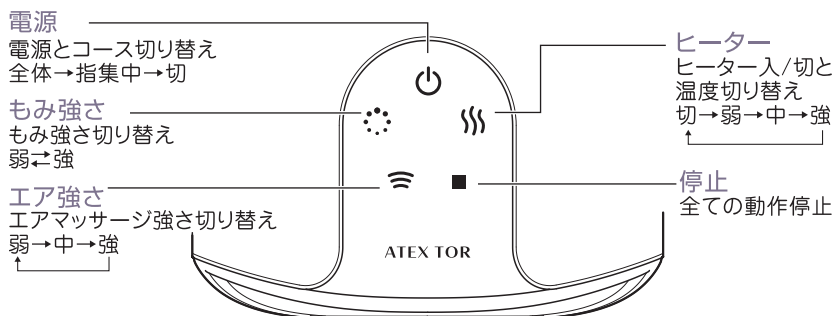


使用前の注意事項 確認ください

- カバー破れがないか確認し、破れている場合は使用を中止してください。お買い上げの販売店、または「カスタマーサービス」に相談ください。
- 電源ボタンや、停止ボタンなど各ボタン、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してください。

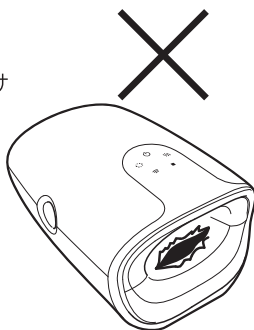

ACアダプターをつなぐ


1

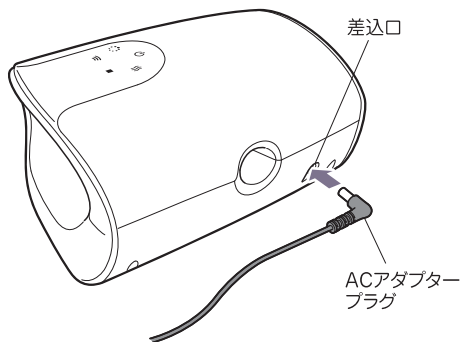

ACアダプタープラグを
本体のACアダプター差入口に
つなぐ

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。


2

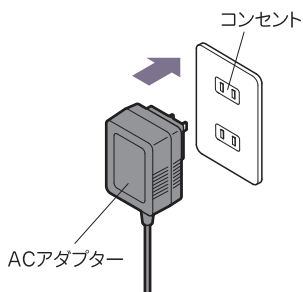

ACアダプターを
コンセントに差し込む



まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

本体に手を差し込む

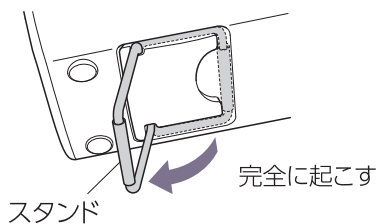

1 本体を好みの角度に調整する

本体裏のスタンドを起こして、本体を好みの角度に調節する

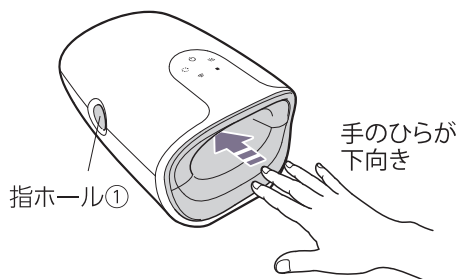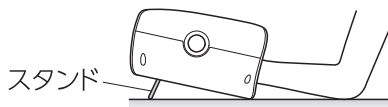

2 本体に手を差し込む

手の平が下向きの状態で奥まで差し込む
手と指の位置を合わせる (下図参照)

小指は以下のどちらかに差し込む

- ・ 右手の場合：指ホール⑤か⑥
- ・ 左手の場合：指ホール①か②

⚠️ ご注意

手のひらを上向きで差し込まないでください
事故やけがの原因になります



指の差し込み場所について (右手の場合)

図のように1本ずつ指ホールに差し込む

親指は指ホール①に差し込む (左手の場合は指ホール⑥)

小指はお好みに合わせて指ホール⑤か⑥に差し込む

(左手の場合は指ホール①か②)

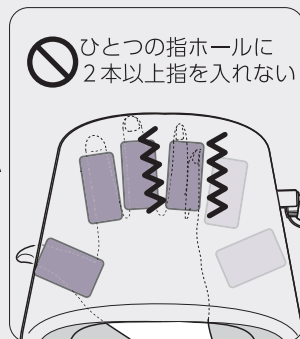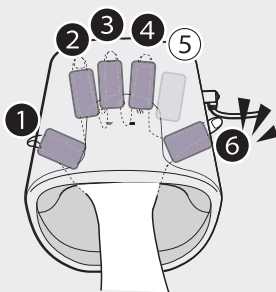

3 電源ボタン を押してマッサージを開始する

電源/コース切替


全体コース (白) ←
→指集中コース (黄)
→切 (消灯)

もみ強さ

弱 (白) ←
→強 (黄)
※スタート時: 弱

エア強さ

弱 (白) ←
中 (黄)
強 (赤)
※スタート時: 弱

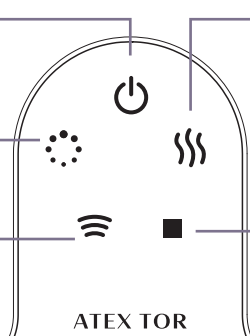

ヒーター

弱 (白) ←
→中 (黄)
→強 (赤)
※スタート時: 切

停止

全ての動作の停止

- 本機はタッチパネル式になっており、指で直接触れて操作します。以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります
 - ・爪の先での操作
 - ・手袋をしたままでの操作

- 動作中にそれぞれのボタンを押すと、切り替えができます。

- マッサージ、ヒーターのいずれかが始動して約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に停止します。

●マッサージコースを選ぶ



ボタンを押すとコースとLED色が切り替わります。



※スタート時は「全体コース」で動作します。

コースの種類

「全体コース」

手全体のエアバグが圧迫と収縮をくり返し、血行を促進します。

「指集中コース」

指のエアバグが重点的に動き、こりをほぐします。

●手のひらのもみ玉の強さを選ぶ

※もみ玉の運転を停止することはできません。

マッサージ動作中に



ボタンを押すと強さとLED色が切り替わります。



※スタート時は「弱」で動作します。

●エアマッサージの強さを選ぶ

マッサージ動作中に



ボタンを押すと強さとLED色が切り替わります。




※スタート時は「弱」で動作します。

●ヒーターを入れる



ボタンを押すと設定温度とLED色が切り替わります。

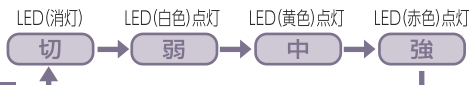

※ヒーターは単独で使うことができます。

※スタート時は「OFF」です。

途中で停止する場合

- 停止ボタンを押すとすべての動作が停止し、LEDが消灯します。

⚠️ ご注意

◦ 手の抜き差しは必ず動作が停止した状態でおこなってください。
事故やけがの原因になります

🧼 お手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度はACアダプターのプラグ(金属部分)をから拭きをしてください。(絶縁劣化防止のため)。

⚠️ ご注意


必ず電源が「切」の状態にACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。

👜 保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。

使わない時の収納方法

本体を立てておくことができます。
※ 立てた状態でマッサージは行わないでください。

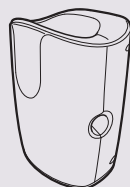

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが間違っていないですか？ 付属の専用ACアダプターを使用してください。
	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。
	各ボタンは正しく動作していますか？
運転中に 停止した	電源ボタン又はヒーターボタンを押してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。スイッチを押すと運転を再開します。
異音がる 音が大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	ハンドケア リュクス P14
商品番号	AX-HP314/315
医療機器認証番号	305AABZX00008000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AC100V 50/60Hz 24W (ヒーター 6.5W)
アダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 0.7A 出力 DC12V 2A
タイマー	10分自動オフ
製品サイズ	(約) W170 × L220 × H135 (mm)
製品重量	約1.3kg
素材	本体 : ABS樹脂 表面生地: ポリエステル、綿 内カバー : ポリウレタン、ナイロン
ヒーター最高温度	約45℃
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼される場合は保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ハンドケア リュクス P14」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービスまでお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

品名 / 型番	ハンドケア リュクス P14 / AX-HP314/HP315		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上日より1年 本体
* お客様	お名前	* 販売店	
	ご住所		
	TEL:() -		

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



株式会社アテックス

ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは
カスタマーサービス



0120-486-505

受付時間 平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

