

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

製造番号

管理医療機器：家庭用エアマッサージ器
ルルド フットケア

品番 AX-HPL207



使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

目次

△ 安全上のご注意	1～3	📁 保管について	12
🔍 梱包内容と各部の名称	4～5	🔧 故障かなと思ったら	12
👤 使いかた	6～11	⚙️ 仕様	13
🧼 お手入れについて	11	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはAX-HPL207をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

！ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味	表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 禁止を促す記号	
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
 強制を促す記号	

！ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい
体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害
からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、
肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・体温38℃以上 (有熱期) の人
例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動
など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人
- ・けんしょう (腱鞘) 炎の人
- ・動脈りゅう (瘤)、静脈りゅう (瘤) のある人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故や健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児やお子様を使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。

使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。
カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。

カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。
事故やけがの原因になります。

 他の治療器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。

マッサージ部周辺にアクセサリなどの装身具をつけて使用しないでください。
事故やけがのおそれがあります。

けい部(首)に使用しないでください。
脚部のマッサージ以外の目的で使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

低温やけどをおこすおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・布団などをかけての使用
- ・熱すぎると感じた場合の使用
- ・ストーブなど暖房器具の近くでの使用

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

電源について

 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

 停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電・ショート・火災の原因になります。

お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。

ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。また、付属のACアダプターは他の商品には使用しないでください。

MODEL No. SAW36-120-3000J (WQB11301-240)

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

安全上のご注意

警告

異常(故障)について

-  故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

その他

-  改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。

注意

ご使用について

-  浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。
布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
本体内部が高温になる可能性があります。
この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。
故障や事故の原因になります。
足を入れたまま、商品を動かさないでください。
事故やけがのおそれがあります。
本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。
足を入れたまま、立たないでください。
故障や事故の原因になります。
踏み台として本体の上に乗ったり、立ったりしないでください。
事故やけがのおそれがあります。
振り回さないでください。
思わぬ事故やけがのおそれがあります。
-  **使い始めは強さを「弱」でご使用ください。**
初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。
1回の使用は10分以内とし、1日の使用は1日2回、20分以内にしてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
マッサージの刺激が強すぎると感じた時は、強さを「弱」にし、使用時間を短くしてください。
強い刺激のままで使用を続けると、健康を害するおそれがあります。

🔍 梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

— 開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください —

- 本体
- ACアダプター
- アジャスター
- 専用ソックス
- フェイスシール
- 取扱説明書

各部の名称



本体

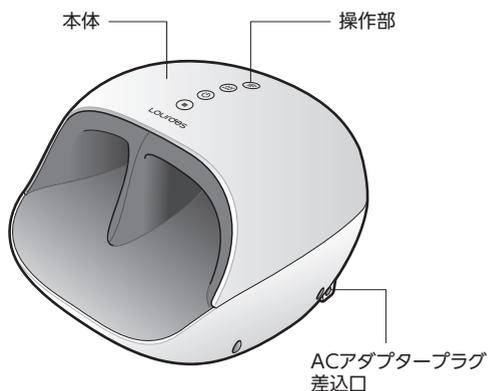


操作部

-  **強さ調整ボタン**
マッサージの強さを選べます
-  **ヒーターボタン**
ヒーターの入/切が選べます
-  **電源・コース選択ボタン**
電源の入/切、マッサージのコースの切り替えができます
-  **停止ボタン**
マッサージを停止します

付属品

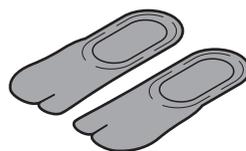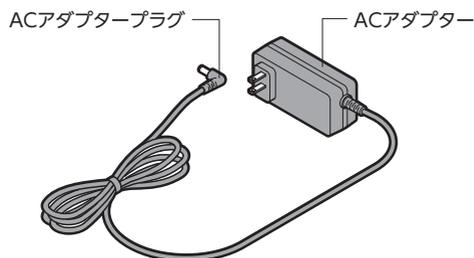


専用ソックス

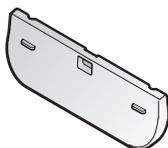

アジャスター




フェイスシール

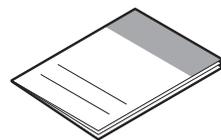

取扱説明書

🔍 梱包内容と各部の名称

マッサージの位置

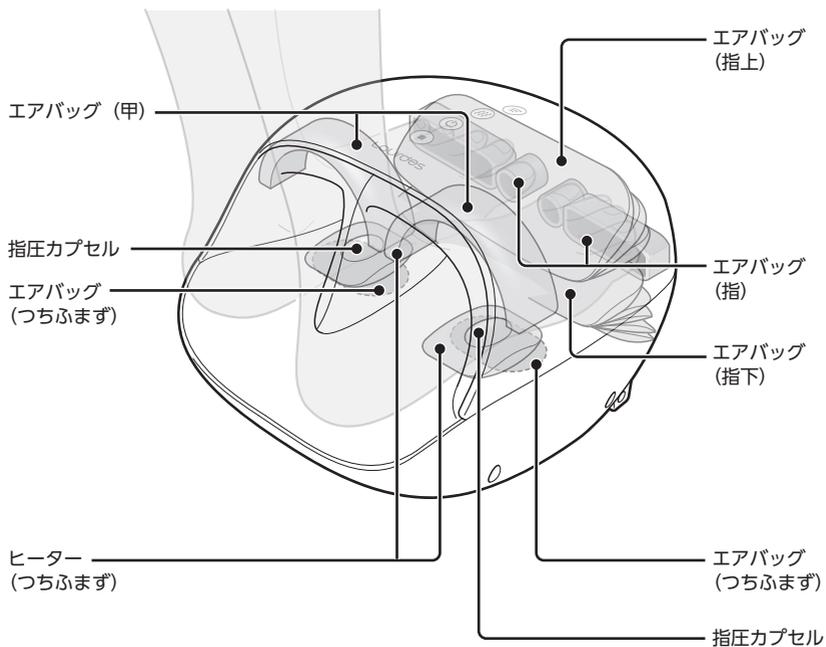


⚠️ **ご注意** 使用前の注意事項

- 使用前にマッサージ部の縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前に操作ボタンや停止ボタンなど各ボタン、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。




マッサージ部
縫製破れがないか確認
してください。

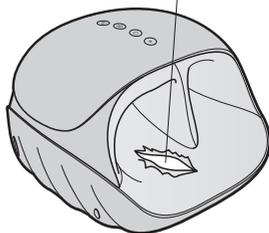

本体の準備をする

1

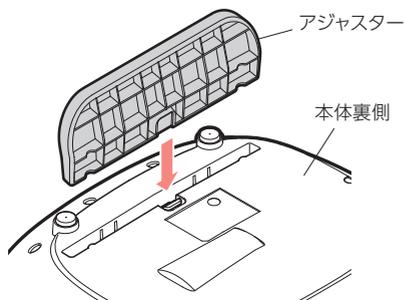


アジャスターを本体裏面の 差込口に挿入


向きに注意して確実に差し込んでください。

POINT

- 本体を傾けずに使用したいときは、アジャスターは必要ありません。外すときは、ツメを押さえながらアジャスターを引き抜いてください。

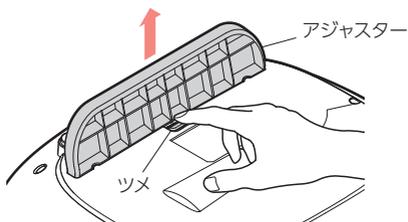


2

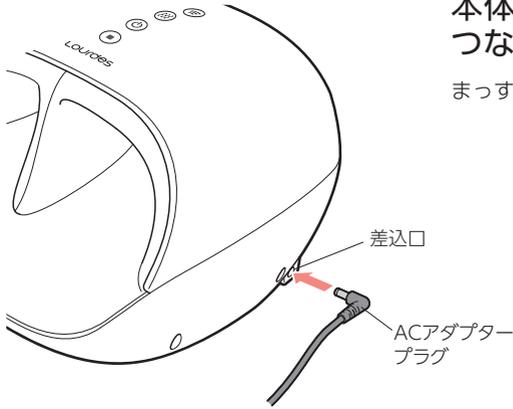

ACアダプタープラグを
本体のACアダプター差込口に
つなぐ

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

3



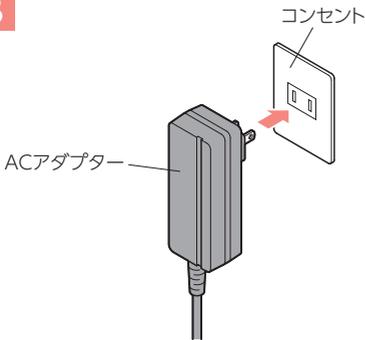


ACアダプターを
コンセントに差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

マッサージをする

1

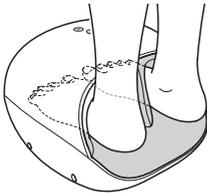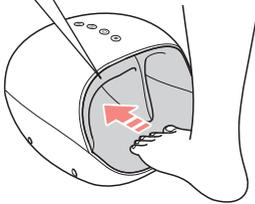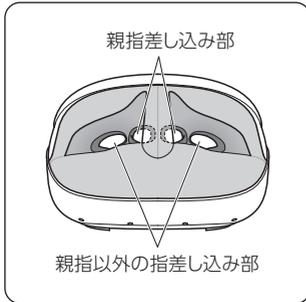

奥までしっかり差し込みます。

本体に両足を差し込む

両足を本体の指の差し込み部にしっかり差し込みます。


この時、親指と親指以外の指が所定位置に入っていることを確認してください。

⚠️ ご注意

本体への足の抜き差しは必ず電源がOFFの時に起こってください。

(専用ソックスの使いかた)

- 本体の汚れ防止で使用される場合には付属の専用ソックスを履いてご使用ください。
- ※ 専用ソックスは単品での販売はしておりません。市販の足袋ソックスや5本指ソックスを代用ください。

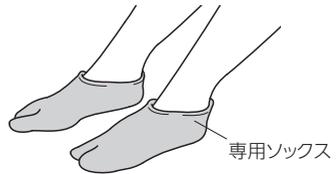

2 電源ボタン を押してマッサージを開始する

電源ボタン  を押すと、「足指集中コース」、強さ「弱」でマッサージ動作を始めます。

- マッサージを開始して約 10 分経過すると、自動的に停止します。
- マッサージが強すぎると感じた時は、「弱」で使用や使用時間を短くしてください。

注意

- 使用中に痛みを感じた時や、気分が悪くなったときは停止ボタン  を押して停止する。健康を害するおそれがあります。

 **強さ調整ボタン**
弱：消灯
中：オレンジ色点灯
強：白色点灯
選択された強さのLEDが消灯・点灯します。
※マッサージ開始時は「弱」

 **ヒーターボタン**
ヒーター「入」の時にLEDがオレンジ色に点灯します。

 **電源／コース選択ボタン**
足指集中コース：青色点灯
ストレッチコース：緑色点灯
足裏指圧コース：白色点灯
選択されたコースのLEDが点灯します。
※マッサージ開始時は「足指集中コース」

 **停止ボタン**
すべての動作が停止します。
すぐに動作を停止したい時に使用します。

■マッサージコースを選ぶ

●コース選択ボタン(🔘)を押すたびに、コースが下記のように切り替わります。

※マッサージ開始時は「足指集中コース」



コース	点灯するLED	コース説明
足指集中コース	青LED 	 親指の間をエアバッグで広げ、指先を上下から押さえることで伸ばしと引っぱる手技のようなマッサージを行います。
ストレッチコース	緑LED 	 足の甲とつまみずのエアバッグで足をしっかりホールドしながら、上下に配置したエアバッグが指先を上下に動かしてストレッチします。
足裏指圧コース	白LED 	 足裏を押さえて足指を曲げるように圧迫・解放を繰り返します。しっかり加圧することで血行を促進し、凝り固まった足裏・足指をほぐします。

※表内のイラストはイメージです。

■マッサージ強さを選ぶ

●マッサージ中に強さ調整ボタン(🔘)を押すたびに、マッサージの強さが下記のように切り替わります。

※マッサージ開始時は「弱」

※初めて使用する場合は「弱」から使用し、慣れてきたら好みの強さでマッサージしてください。



ヒーターを使う

- マッサージ中にヒーターボタン (🔥) を押します。
LEDオレンジ点灯でヒーターが動作します。
※マッサージ開始時は「切」
- もう一度ヒーターボタン (🔥) を押すとヒーターが切れます。
※ヒーターのみでも使用できます。



3 マッサージを終了する

- 約10分経過すると、自動的に停止します。
- 電源ボタン (🔌) を押し、電源を切ることができます。(P.10)
- 停止ボタン (■) を押しでも停止できます。(P.9)

4 ACアダプターをコンセントから抜く

👤 お手入れについて

本体

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジン、アルコール、漂白剤などは使用しないでください。

⚠️ 注意

- 必ず電源が「切」の状態ACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。

専用ソックス

- 洗濯絵表示に従って洗ってください。

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、直射日光をさけ、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	電源プラグが抜けていませんか？ 電源プラグをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。 スイッチは正しく動作していますか？
運転中に停止した	スイッチを押してから、約10分経過するとオフタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。 故障ではありません。スイッチを押すと運転を再開します。
異音がる音が大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。
マッサージが感じられない	正しい位置に足を差し込んでいますか？
ヒーターを「入」にしても温かにならない	ヒーターのLEDが点灯しているか確認してください。 気温が低い時など温かくなるまでに時間がかかることがあります。マッサージの補助機能なので、暖房器具のようには温かくなりませんが、故障ではありません。



仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用エアマッサージ器 (JMDNコード 34663000)
販売名	ルルド フットケア
商品番号	AX-HPL207
医療機器認証番号	303AABZX00061000
電気定格	AC100V 50/60Hz 30W (内ヒーター 10W)
アダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 1.3A 出力 DC12V 3A
タイマー	(約) 10分自動オフ
製品サイズ	本体：(約) W310×L295×H210 (mm)
対象サイズ	本体：足サイズ29cm以下 (専用ソックスは 26cm 以下)
製品重量	(約) 2.5kg
素材	本体：ABS樹脂 内カバー：ポリエステル、ポリウレタン (防汚・抗菌仕様) 専用ソックス：綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン (抗菌仕様)
エア圧力	最大 (約) 80kPa
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド フットケア」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス
〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	ルルド フットケア / AX-HPL207		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上日より1年 本体
*お客様	お名前	*販売店	
	ご住所		
	TEL: () -		

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社アテックス
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)