

取扱説明書

保証書付

添付文書


保管用

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器

フットマッサージャー ハリラネズミ AX-HXL199

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名称とはたらき	4
ご使用前の準備	5
使いかた	6~7
保管について	8
お手入れ	8
故障かなと思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	裏表紙

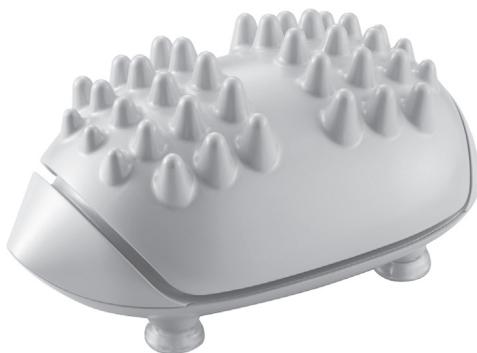

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびは AX-HXL199 をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号

禁止



強制を促す記号

必ず守る



警告



禁止

次の人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。
・医師からマッサージを禁じられている人
例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、
急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症



禁止

幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。



禁止

使用前に振動部に破損がないかを確認し、
破損がある場合は使用しないでください。



分解禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。

火災・感電・けがの原因になります。



禁止

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。



禁止

頭、顔、のど、胸、腹部、骨部等(ひじ、ひざ、など)には使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底にコードを踏んだ状態で使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

自分で意思表示のできない方や乳幼児以外の子供で、保護者又は専門家の監督下で使用する以外は、使用させないでください。
事故やけがの原因になります。



禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。



禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

治療部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・背骨に異常のある人や曲がっている人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人

! ご使用前に振動部に異常がないか、正しく動作するか確認してください。
必ず守る 事故やけがのおそれがあります。

! 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
必ず守る 健康を害するおそれがあります。

! 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
必ず守る 事故やけがの原因になります。

! 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に連絡してください。
必ず守る 事故やけがの原因になります。

! 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
必ず守る 火災やけがの原因になります。

! 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
必ず守る 事故やけがのおそれがあります。

! お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
必ず守る 感電やけがの原因になります。

! 停電のときはすぐに電源を切ってください。
必ず守る 感電・ショート・火災の原因になります。

! 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはご購入先に修理を依頼してください。
必ず守る 事故の原因になります。

! 注意

! 浴室など湿気の高い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
禁止 感電や故障の原因になります。

! この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。
禁止 故障や事故の原因になります。

! 製品の上に立たないでください。この商品は椅子などに腰かけた状態で使用することを意図した商品です。
禁止 故障や事故の原因になります。

! 本体に強い衝撃をあたえないでください。
禁止 故障や事故の原因になります。

! 使用中は眠らないでください。無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

! 1回の使用は10分以内にしてください。長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

! 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源のプラグを持って引き抜いてください。
必ず守る 感電・ショート・発火の原因になります。

! 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
必ず守る 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

! 初めてご使用の際は、弱の設定からご使用ください。
必ず守る 事故やけがのおそれがあります。


! 振動の動作時、床へびく場合は、必ずラグなどの敷物を敷いて使用してください。
必ず守る 騒音の原因になるおそれがあります。

! 本製品は家庭用です。病院等での治療用機器ではありませんのでご注意ください。
必ず守る 事故やけがの原因になります。

! 使用前には点検を行い、故障又は異常が認められた場合は、お買上げの販売店、又は製造販売業者までご連絡ください。
必ず守る 事故やけがの原因になります。

各部の名称とはたらき

● 本体

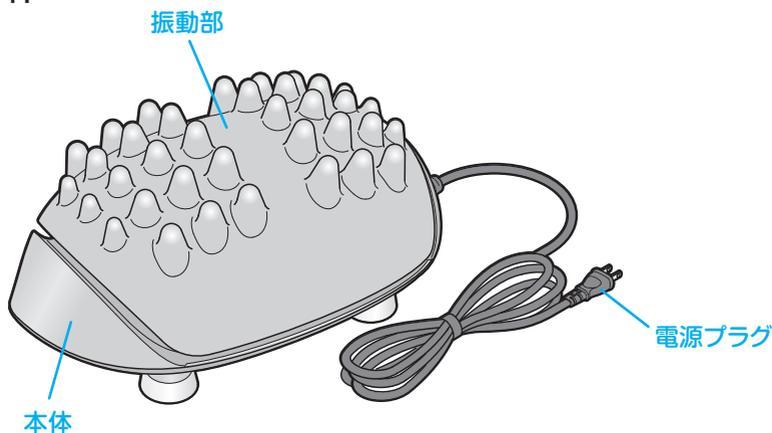


付属品

取扱説明書




シール

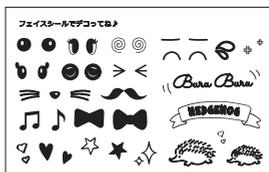

お好みで本体に貼り付けて
お楽しみください。

● 操作ボタン

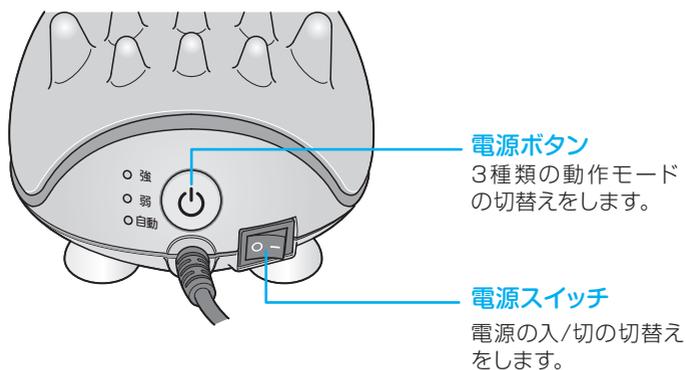

ご使用前の準備


⚠ 注意

使用前の注意事項

- ・使用前に振動部に異常がないか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- ・使用前に、正常に動作するか確認してください。
- ・しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。

振動部

異常がないか確認してください。

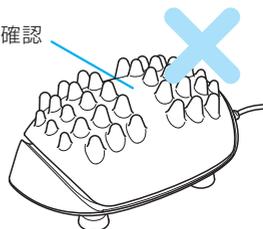

●設置場所のご注意


- 使用する際は、本体を平らな安定した場所に置いてください。
- 畳ややわらかいフローリング等の上で使用する場合は、必ずラグなどの敷物を敷いて使用してください。
- テレビ、ラジオなどのAV機器から離れた場所でご使用ください。雑音が入ることがあります。
- 動作時に振動が床へひびく場合は、必ずラグなどの敷物をご使用ください。騒音の原因になるおそれがあります。

STEP

1

電源プラグをコンセントに差込む


正しく確実に差し込んでください。

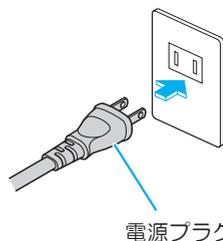


使いかた

STEP
1

電源スイッチ ON を入れる

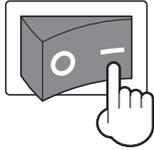


ON

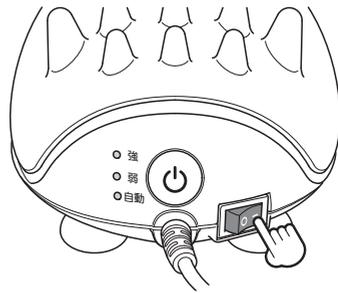


STEP
2

足を本体に乗せる

足の裏やふくらはぎなどを下図のように振動部に当ててください。

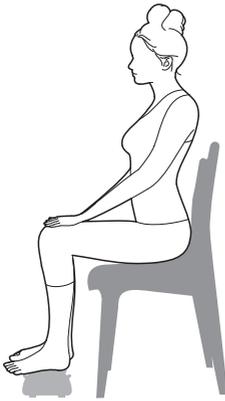

<足裏>

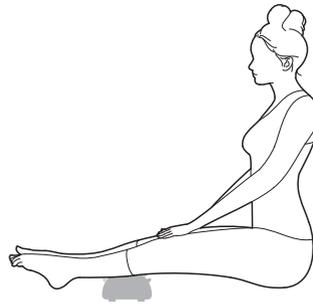

<ふくらはぎ>

⚠ 注意

製品の上に立たないでください。

この商品は椅子などに腰かけた状態で使用することを意図した商品です。
故障や事故の原因になります。


STEP
3

電源ボタン を押して使用を開始する

強モードで運転が始まります。



電源ボタン  を押すたびに強モード→弱モード→自動モード→電源OFFと切り替わります。

(開始後約10分でタイマー機能がはたらき、自動的に停止します。)

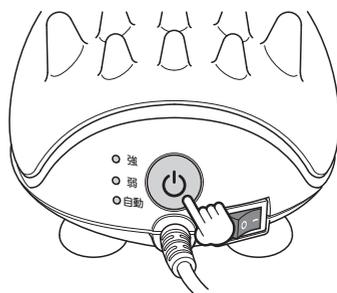

STEP
4

電源スイッチ を切る

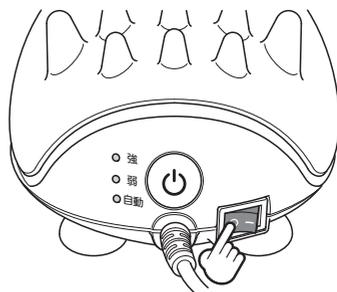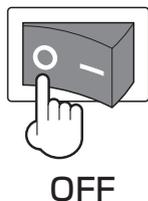

保管について

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように汚れやほこりを取った後、箱などに入れて直射日光をさけ、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

お手入れ



警告

必ず電源が「切」の状態電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
本体は水につけたり水洗いしないでください。
感電やショートによる火災の原因になります。

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きしてください。(絶縁劣化防止のため)
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	電源プラグが抜けていませんか？ 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでもう一度操作してください。
運転中に停止した	電源ボタンを押してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。 再度電源を入れなおしてください。
	大きな負荷がかかっていませんか？ 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 再度電源を入れなおしてください。
異音がる音大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器
販売名	フットマッサージャー ハリラネズミ
医療機器認証番号	230AABZX00017000
商品番号	AX-HXL199
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AC100V 50/60Hz 18W
タイマー	約10分自動オフ
製品サイズ	(約) W250 × L150 × H130 (mm)
製品重量	約1.2kg
素材	構造部材：ABS樹脂
振動数	強：約2800回/分、弱：約2100回/分
生産国	中国
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売元	株式会社 アテックス

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「フットマッサージャー ハリラネズミ」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番		フットマッサージャー ハリラネズミ / AX-HXL199	
お買上げ年月日*		年 月 日	保証期間 お買上げ日より1年 本体
★お客様	お名前 様		★販売店
	ご住所 TEL:() -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となる場合がありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



受付時間 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)