



製造番号

AIR MOMI
FOOT MASSAGER

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器

エアもみフットマッサージャー AX-HXT172

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名称とはたらき	4
ご使用前の準備	5
使いかた	6～7
保管について	8
お手入れ	8
故障かなと思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	裏表紙



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびは AX-HXT172をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ALEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号

禁止



強制を促す記号

必ず守る



警告



禁止

次の人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。

・医師からマッサージを禁じられている人
例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、
急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症



禁止

幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。

思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

使用前にマッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。

破れている場合は使用しないでください。



分解禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。

火災・感電・けがの原因になります。



禁止

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底にコードを踏んだ状態で使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。事故やけがの原因になります。



禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。健康を害するおそれがあります。



禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

施術部周辺にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・背骨に異常のある人や曲がっている人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、
血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人

! 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

必ず
守る

! 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

必ず
守る

! 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に連絡してください。
事故やけがの原因になります。

必ず
守る

! 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
火災やけがの原因になります。

必ず
守る

! 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故やけがのおそれがあります。

必ず
守る

! この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用してください。
低温火傷のおそれがあります。

必ず
守る

! 注意

! 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。

禁止

! この商品は一人用です。
複数の人が同時に使用しないでください。
故障や事故の原因になります。

禁止

! 製品の上に立たないでください。
この商品は椅子などに腰かけた状態で使用することを意図した商品です。
故障や事故の原因になります。

禁止

! 本体に強い衝撃をあてないでください。
故障や事故の原因になります。

禁止

! 使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

禁止

! 1回の使用は15分以内にしてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

必ず
守る

! 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

必ず
守る

! 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

必ず
守る

! 付属品のACアダプターは指定されたものを使用してください。

必ず
守る

MODEL No.	YJS036A-2401500J
-----------	------------------


他の電気製品には使用しないでください。
電圧の違いで、発火・故障のおそれがあります。

! 初めてご使用の際は、弱の設定からご使用ください。
事故やけがのおそれがあります。


必ず
守る

各部の名称とはたらき

● 本体

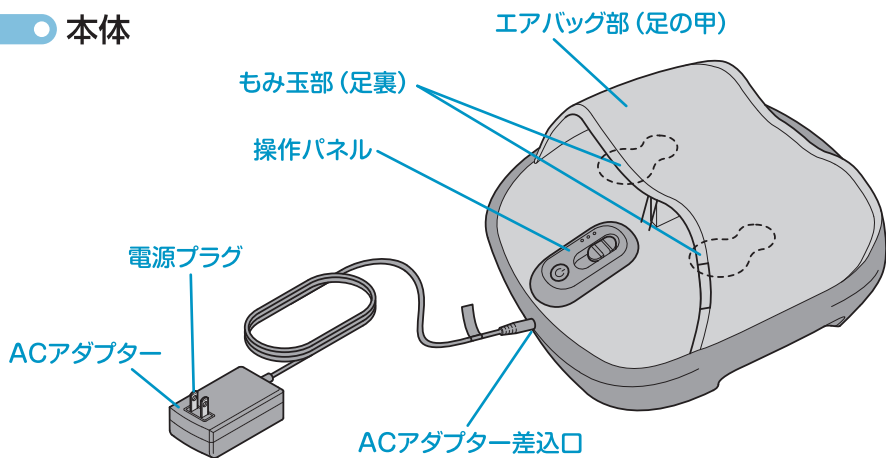


● マッサージの位置

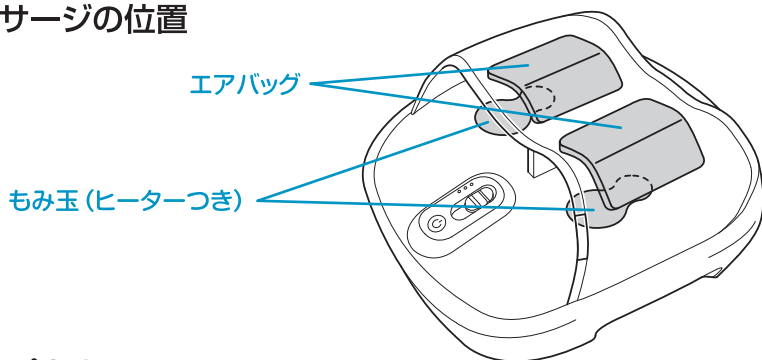

● 操作パネル

電源ボタン

電源の入/切と、もみ玉ヒーターの入り切りをします。

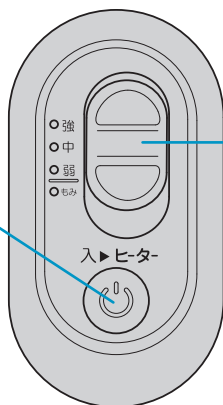

スライドスイッチ

エアの入/切と、エアの強さの切替え (強・中・弱・もみ) をします。


ご使用前の準備

梱包内容

本体



ACアダプター

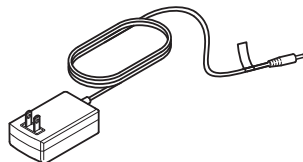


⚠ 注意

使用前の注意事項

- 使用前にマッサージ部の縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前にスライドスイッチや、電源ボタンが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。

マッサージ部

縫製破れがないか確認してください。

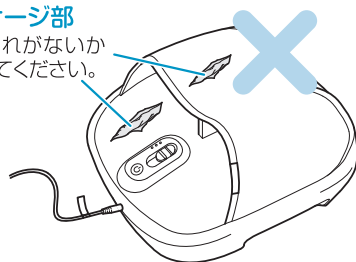


STEP

1

ACアダプターのジャックを本体に差込む

ACアダプターのジャックを本体のACアダプター差込口へ、まっすぐ差込んでください。

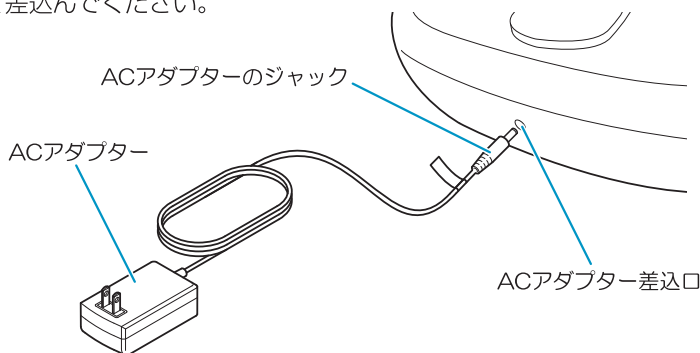

⚠ 注意


付属品の専用アダプターを使用してください。専用アダプターは、他の電気製品には使用しないでください。電圧の違いで、発火・故障のおそれがあります。

STEP

2

ACアダプターをコンセントに差込む


正しく確実に差し込んでください。

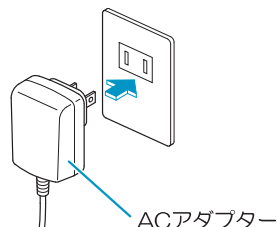

使いかた

足を入れる


- ・両足を本体の奥まで入れてください。
- ・もみ玉がつちふまずにあたる位置がおすすめです。

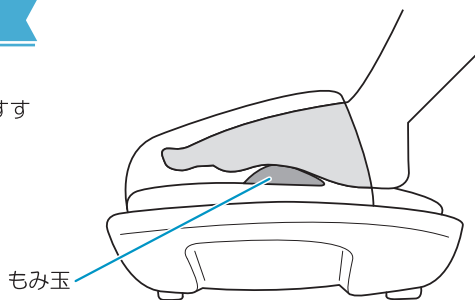


使用を開始する

電源ボタンを押す

電源ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

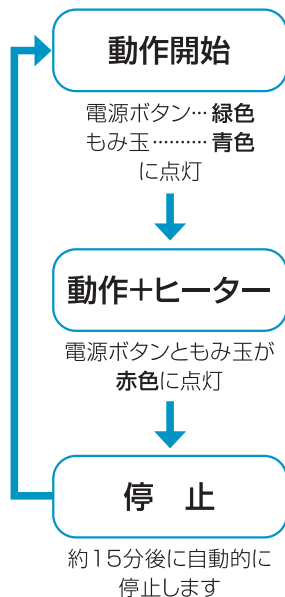

電源ボタン (点灯)

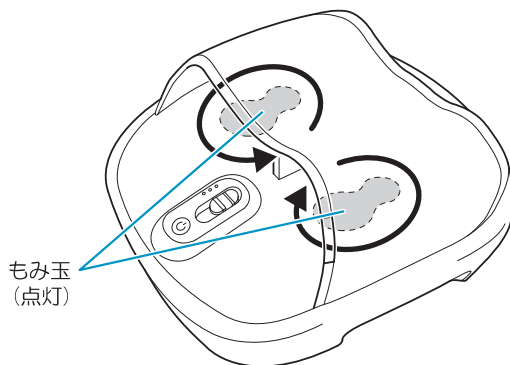

強さを変える



スライドスイッチを変える

スライドスイッチで、「エア強」、「エア中」、「エア弱」、「もみのみ」を切替えます。動作中強さのLEDランプが点灯します。

※使い始めは弱で使用し、使い慣れてから強さを調節してください。

エア不要の場合は「もみ」に合わせてください。

※マッサージ途中でも変更できます。

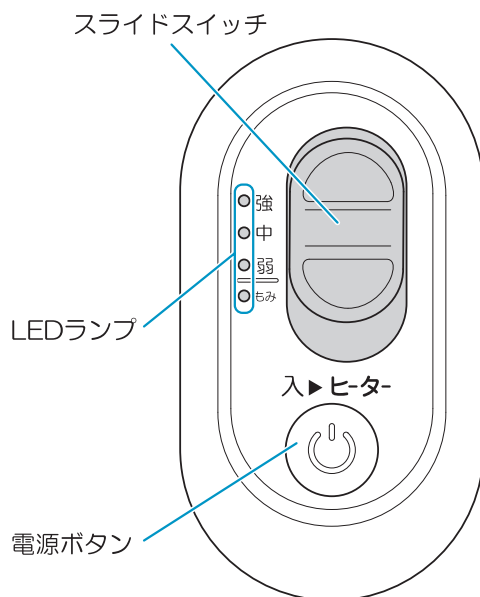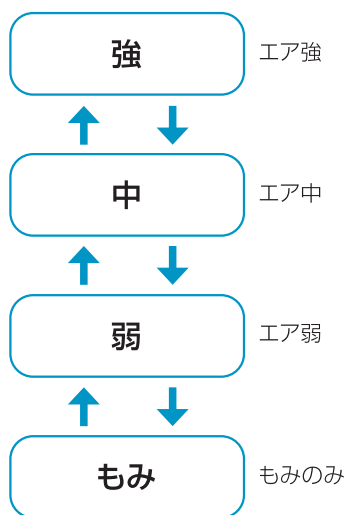

●約15分後に自動的に停止します。

動作を停止する

電源ボタンを押す

電源ボタンが緑色点灯の時は2回、赤色点灯の時は1回電源ボタンを押して動作を停止させてください。



注意 立ったまま足を入れたり、足を本体に入れたまま立ち上がらないでください。思わぬ事故やけがのおそれがあります。

保管について

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように汚れやほこりを取った後、箱などに入れて直射日光をさけ、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

お手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きしてください。(絶縁劣化防止のため)



警告

必ず電源が「切」の状態ですべてのACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターのジャックを本体にしっかりと差し込み、ACアダプターをコンセントにしっかりと差し込んでもう一度操作してください。
運転中に停止した	電源ボタンを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。 再度電源を入れなおしてください。
	大きな負荷がかかっていませんか？ 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 再度電源を入れなおしてください。
異音がる音大きい	マッサージの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード 34662000)
販売名	ルルド エアもみフットマッサージャー
医療機器認証番号	225AABZX00140000
商品番号	AX-HXT172
使用目的・効能または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AC100V 50/60Hz 20W (ヒーター5W)
タイマー	約15分自動オフ
製品サイズ	(約) W320 × L340 × H180 (mm)
製品重量	約2.3kg
素材	構造部材：ABS樹脂、PP樹脂 もみ玉部：ポリエステル65%、ナイロン35% エアバッグ部表側：合成皮革
回転数	約30回転/分
エア圧力	約90kpa
ヒーターの温度	50℃以下
生産国	中国
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売元	株式会社 アテックス

