

取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号



COOLFLASH SMOOTHER

ルルドフェイスメイク クールフラッシュスムーザー

品番 AX-NBL503bk

目次

⚠ 安全上のご注意	1 ~ 4	🔧 故障かなと思ったら	13 ~ 14
🗂 梱包内容と各部の名称	5	📦 保管について	14
👤 使い方	6 ~ 12	⚙ 仕様	14
🧼 お手入れ	12	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはAX-NBL503bkをお買上げいただき、誠にありがとうございます。**ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。**なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号

⚠ 危険

症状について



次の人は使用しないでください。

- ・体内埋（植え）込み型および装着型の医用電子機器を使用している人
 - ・ペースメーカー、神経刺激装置、インスリンポンプなど体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。

- ・妊娠中の女性、授乳中の女性
- ・金属アレルギーを含むアレルギー体質の人
- ・肌の色が濃い人（P.6「肌の色と毛の色による推奨照射レベル」表の×に該当する人）
- ・30日以内に脱毛に化学的方法を使用した方、短時間で美白製品を使用した方、ビタミンAを含む化粧品を使用した方
- ・次の病気や症状をお持ちの方
 - ・重度の心臓病、中等度から重度の高血圧、悪性腫瘍、毛嚢炎、感染性皮膚疾患、皮膚にやけどを負った人、抗凝固障害のある人。
 - ・瘢痕および創傷治癒不良の病歴を含む、異常なコラーゲン代謝を有する方。
 - ・照射部位に静脈瘤や血管拡張薬などの血管疾患がある人。
 - ・皮膚が光に敏感で、皮膚の発疹やアレルギーを起こしやすい場合。
 - ・照射部位が感染している場合、単純ヘルペス、皮膚病変および血腫。
 - ・免疫応答を抑制する病気（HIV感染、エリテマトーデス、イエリン病など）を持つ人々。
 - ・出血性疾患に苦しんでいる人。フラッシュアレルギー性てんかんのある人。

ご使用について



本製品は防水仕様ではありません。

- 入浴中やシャワー中には使用しないでください。
- 浴槽、シャワートレイ、洗面台、または湿気の多い場所の近くで使用しないでください。

感電、故障の原因になります。

次の部位には使用しないでください。

- | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 鼻孔 | 8. 肝斑、シミ、ほくろなど黒色
または暗褐色の肌部分 | 13. 形成外科、手術部位、美容整形部位 |
| 2. へその内側 | 9. 乳首、乳輪 | 14. 体内の人工インプラント上またはその近く |
| 3. 耳 | 10. 陰唇、膣、陰囊、肛門 | 15. かさぶた、湿疹、あざ、吹き出物、いぼ、傷跡、
かぶれなど |
| 4. 眉毛、髪 | 11. 大静脈 | 16. 血管腫 |
| 5. 眼球、まぶた、目の周り | 12. タトゥー、ボディペイン
ティングのある部位 | 17. 日焼けした肌 |
| 6. 喉頭隆起 | | |
| 7. にきびエリア | | |

お子様やペットには使用しないでください。また、お子様やペットのいる場所での使用・保管はおやめください。

事故やけがの原因になります。

製品使用後、アダプターと照射口は非常に熱くなりますので、触れないでください。

けが・やけどの原因になります。



使用するときは、必ず保護メガネを着用してください。

照射の際の点滅光が視力に影響を与える可能性があります。

清掃するときは、本体の電源を切り、電源プラグを抜いて、本体を冷ましてください。

感電、故障の原因になります。

電源について



電源ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

ショート・故障の原因になります。

コードや電源プラグなどが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

ショート・火災の原因になります。



お手入れの際は必ず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

けがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。

ショート・発火の原因になります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による漏電・火災の原因になります。

ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。

また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。

MODEL No. AP095G-24250

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

安全上のご注意

異常(故障)について

-  ご使用前に必ず製品をご確認ください。製品またはアダプターが損傷している場合は、使用を中止してください。
事故やけがの原因になります。
使用前に照射口を確認し、変形、変色、破損等がある場合は使用しないでください。
やけどや肌トラブルの原因になります。
-  故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
例) 本体またはアダプターが異常に熱い、異常な音がする、こげ臭いにおいがする など
事故やけがの原因になります。

その他

-  改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。

注意

ご使用について

-  磁力を発する機器に照射口を近づけないでください。
誤動作や故障の原因になります。
使用中、手で背面のファンをふさがないでください。また、不使用時に本体を横置きにして、ファンをふさがないでください。
本体が熱を持ち、発火や故障の原因になります。
照射口を黒い物体に向けないでください。
機械が正常に動作しなくなるおそれがあります。
衣服、髪の毛などを照射しないでください。
焦げ付き、変色、損傷のおそれがあります。
エッセンシャルオイル製品と同時に使用しないでください。
使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。
可燃性および爆発性の物質(噴霧器やガソリンスタンドなどを含む)の近くで使用しないでください。
火災、感電、その他の危険を引き起こす可能性があります。
直射日光の当たる場所で使用しないでください。
故障・発火のおそれがあります。

ご使用について つづき



暗い場所で使用しないでください。

誤動作によりけがや故障のおそれがあります。

電源を入れても内蔵ファンが動かない(ブーンという音がしない)場合は、使用しないでください。

誤動作により故障・発火のおそれがあります。

背中や肩など、手の届きにくい場所には、お一人で使用しないでください。

誤動作によりやけどや肌トラブルの原因になります。

照射後24時間以内は、照射した部分のお肌を直射日光や紫外線にあてないでください。

肌トラブルの原因になります。

同じ箇所に過度な照射はしないでください。

●1回の使用は5分以内としてください。

●1日に同じカ所に2回以上使用しないでください。(シングルモードの場合)

肌を傷つけたり、肌のトラブルや故障の原因になります。

アクセサリーなどの硬いものをつけたまま使用しないでください。

事故やけがの原因になります。



照射口の汚れは定期的に掃除してください。

使用中のやけどや誤動作のおそれがあります。

照射部位のお肌は清潔で、ローション、潤滑液、その他の化粧品を使用していないことを確認し乾燥した状態で使用してください。

使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。

必ず除毛してからケアをしてください。

使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。

使用前に、肌に残った毛クズはきれいに取り除いてください。

使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。

顔に使用する場合は、必ずメイクを落としてからケアをしてください。

使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。

お肌の状態に合わせて照射レベルを設定してください。初めて使用する場合は、必ずレベル1から使用を開始してください。

肌トラブルの原因になります。

痛みを感じなくても、無理に照射レベルを上げないでください。

肌トラブルの原因になります。

本製品の使用可能な周囲温度は0~45℃です。使用前に室温を確認してください。

故障・破損の原因になります。

使用後は本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

誤動作により故障・発火のおそれがあります。

肌に炎症が発生した場合は使用を中止してください。2日経っても炎症が続く場合は、専門家または皮膚科医に相談してください。

肌のトラブルになります。

梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください。


- 本体
- 電源ケーブル
- ACアダプター
- 保護メガネ
- 取扱説明書

各部の名称

本体

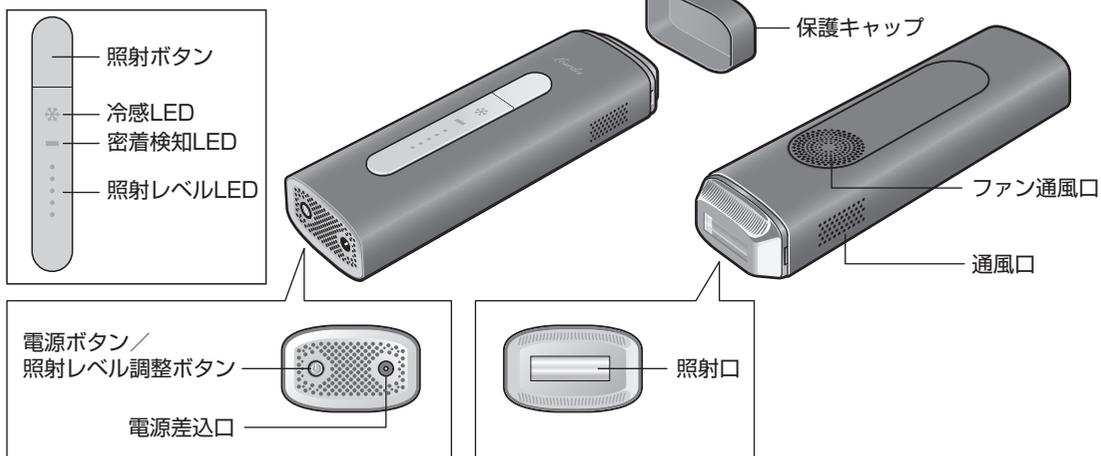

付属品

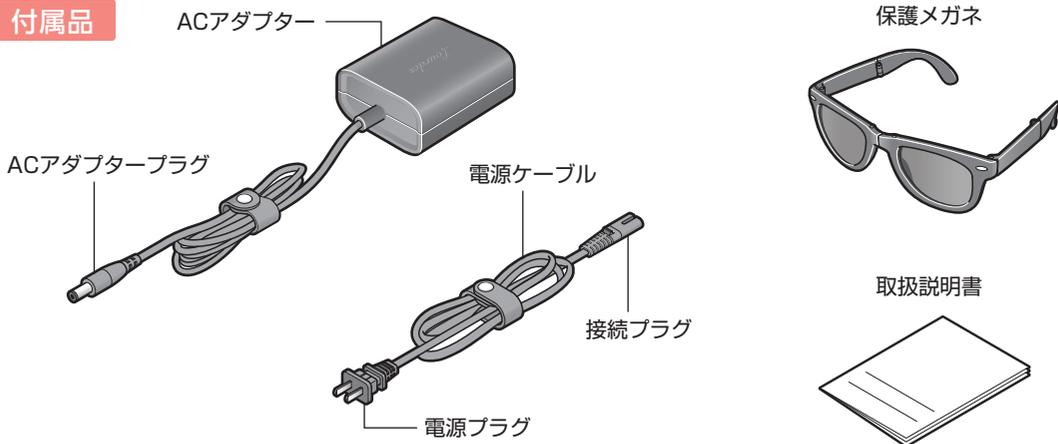

使い方

使用前の準備

1 照射する部分のお肌を確認する


●ムダ毛がシェービングされているか ●お肌がきれいに洗われているか ●完全に乾いているか
香水、ローション、ボディローション、日焼け止めなどが残っていないかを確認してください。

2 照射口を確認する

●汚れや毛くずの付着がないか ●照射口に損傷や異常がないか

製品の誤動作・劣化・肌トラブルを防ぐため、汚れがある場合は必ず清掃してください。

※照射口にキズや割れなどの損傷がある場合は、使用を中止してください。

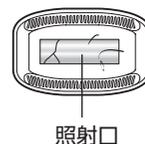

3 本製品を使用する前に、皮膚テストを実行する

①皮膚テストを行う部位を選んで、ムダ毛を剃り、肌を清潔で乾燥した状態に保ちます。

②照射レベルを1に設定し、肌に1回照射します。


(P.7～P.9「使用方法」参照)

③2時間後、肌の状態を確認してください。照射した部位に異常(赤み、水ぶくれ)がなければ、問題ありません。

④照射レベル2～5でも、それぞれ同様にテストをおこない、異常がないか確認してください。

使用の際は、下表を参考に適したレベルを選んでください。

※必ず、皮膚テストの結果で問題のない照射レベルで使用してください。

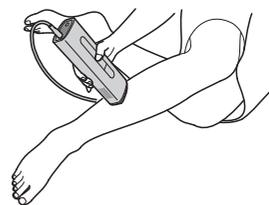

肌の色と毛の色による推奨照射レベル

×に該当する方は使用できません。

毛の色 \ 肌の色	白色	象牙色	乳白色	ライトブラウン	ブラウン	ダークブラウン 黒色
黒色	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
ダークブラウン	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
ブラウン	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
ライトブラウン	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
金色	×	×	×	×	×	×
赤色	×	×	×	×	×	×
白色	×	×	×	×	×	×

注：表の数値は推奨照射レベルであり、効果には個人差があります。

使い方


使用方法

1 ケアしたい部分のムダ毛を、カミソリ等でシェービングする

- ⚠ 注意**
- 必ず除毛してからケアをしてください。
※本製品には除毛機能はありません。
 - 肌に残った毛クズはきれいに取り除いてください。
 - 顔に使用する場合は、必ずメイクを落としてからケアをしてください。

2 ACアダプターを接続する

- ①ACアダプタープラグを本体の電源差込口に差し込み、ACアダプターの接続口に電源ケーブルの接続プラグを差し込みます。
- ②電源プラグをコンセントに差し込んでください。
※確実に差し込んでください。

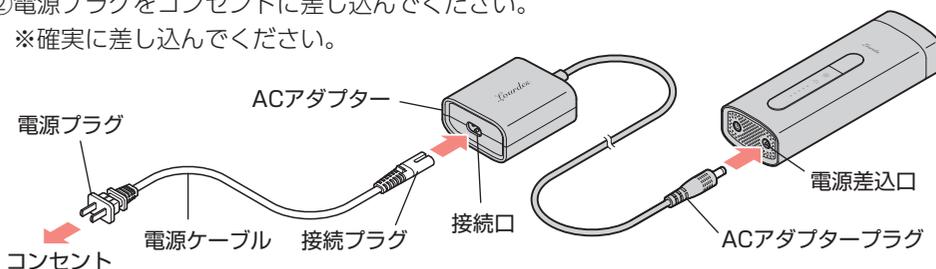

POINT

- 各プラグは差込口に、根元までしっかり差し込んでください。

3



長押しする



電源を入れる

本体後部の電源ボタンの  を長押しすると電源が入り、照射レベルLEDと冷感LEDが点灯します。

- 作動開始の照射レベルは1です。

POINT

- 本体の電源を入れると、ファンの回転音が鳴ります。
冷却装置が作動し、照射口が冷たくなります。

4




保護メガネを着用する

⚠ 警告 ●使用するときには、必ず保護メガネを着用してください。


- ①付属の保護メガネを図のように広げて展開します。
- ②保護メガネを装着します。

5

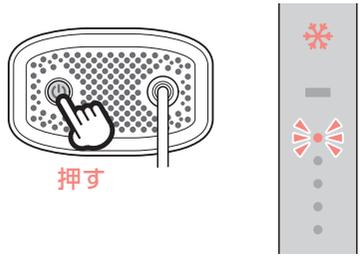


照射レベル調整ボタン を押し、照射レベルを調整する

照射レベル調整ボタン  を押しごとに照射レベルは、下図のように切り替わります。

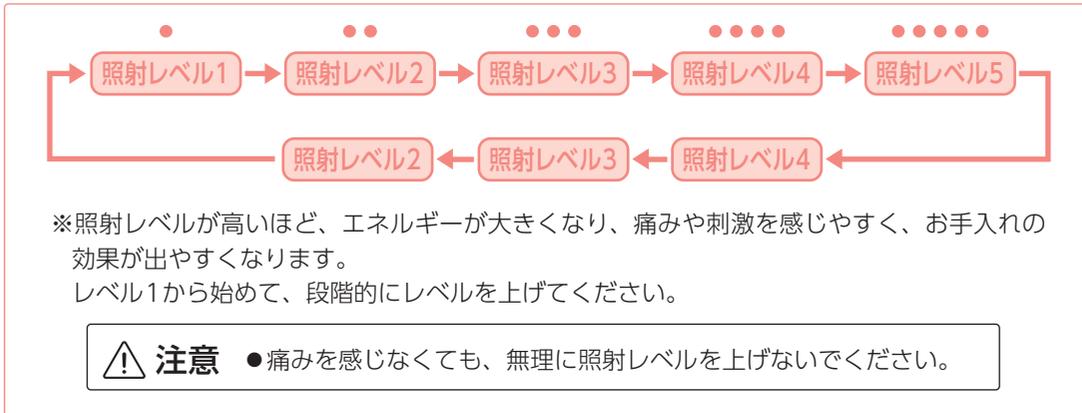

6

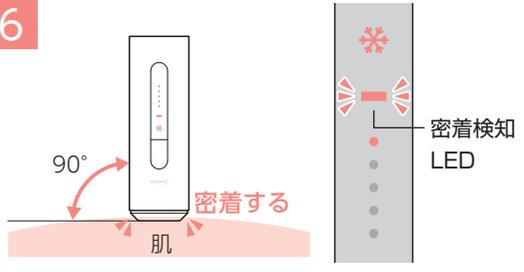


ケアしたい部分に照射口をあてる

照射口をすき間なくお肌と垂直に当ててください。
※密着検知LEDが白色に点灯し、照射口が肌に密着していることを示します。
密着検知LEDが点灯していない場合は、照射口が肌に密着していないため、照射ボタンを押しても照射されません。

使い方

使用方法

7

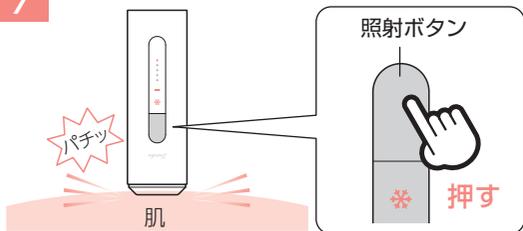

照射する

照射ボタンを押してケアを開始します。

シングルモード → 照射ボタンを押します。

連射モード → 照射ボタンを長押しします。

(P.10「使用モードについて」参照)

※密着検知LEDが点灯していないと照射しません。

8 ケアを終了する

①ケアしたい部分の照射が終わったら、電源ボタン  を長押しして電源を切ります。

※約3分間、操作せずに経過すると、自動的に電源が切れます。

②電源プラグを抜いてください。

照射後のお肌のお手入れ

- ケア後6時間以内は水との接触を避け、その後は保湿度で照射部位を保湿することをおすすめします。
- 脇の下を照射した直後に制汗剤を使用しないでください。
- ケアした後6時間程度は、香水、フェイシャルマスク、スクラブビーズを含む化粧品を使用しないでください。
- ケア後24時間以内は紫外線を避けてください。必要に応じて日焼け止めを塗ってください。

●男性の使用について…

本製品は、男性でもご使用いただけます。

ただし、一般的に男性は女性に比べて体毛が太く毛量も多いため、肌への刺激が強くなるおそれがあります。

お肌のトラブルを避けるために、必ず照射レベルは1から使用してください。

使用モードについて

本製品は、以下のモードを使用してお肌のケアをすることができます。

シングルモード

唇の毛、脇の下、顔、ビキニエリアなどの小さなエリアへの使用に適しています。

お肌のケアしたい部分に照射口を置きます。このとき、照射口がお肌に垂直にピッタリとフィットしていると、密着検知LEDが点灯し、照射が可能になります。

照射ボタンを**1回押す**と、フラッシュが照射されます。

位置を移動させながら、一回ずつ照射ボタンを押してフラッシュを照射します。密着検知ランプが点灯するのを待ってから、照射ボタンを押してください。

上記の操作を繰り返します。



連射モード


腕、脚、その他の広いエリアへの使用に適しています。

お肌のケアしたい部分に照射口を置きます。このとき、照射口がお肌に垂直にピッタリとフィットしていると、密着検知LEDが点灯し、照射が可能になります。

照射ボタンを**押しのまま**にすると、一定の間隔でフラッシュが照射されます。

照射口をお肌にフィットさせたまま、一定速度で本体を動かして(スライドさせて)ください。

同じエリアを前後に2回スライドさせることで、効果の差が少なくなります。

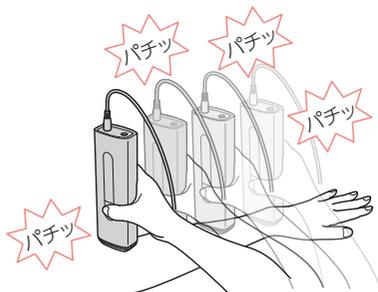


POINT

- 照射レベルが高いほど、フラッシュの間隔は長くなります。

👤 使い方

使い方のコツ

- 本製品の照射口にはサファイアクリスタルが採用されており、照射していない間は冷感モードになって、肌への冷却効果を発揮します。ただし、連続して照射すると照射口に熱が蓄積されます。1カ所への照射が完了したら、約30秒間は照射せずに、肌に照射口を当てて数回スライドさせてください。その後、次の箇所のケアを行ってください。上記の操作を繰り返すことで肌を落ち着かせることができ、照射口の冷却効果を保つことができます。
- 本製品を使用する場合は、照射口を肌にしっかりと押し当て、毛の根元部分に十分に接触させてください。そうすることで、毛根に高いエネルギーを与え、有効的な効果が得られます。また、冷却効果がある照射口が肌に触れることで、あらかじめ表皮を冷やし肌の熱量を減らし、肌を保護するのに役立ちます。

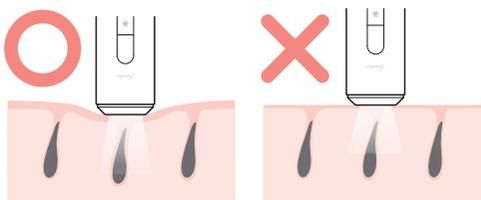

●照射口の結露について…

本製品を使用中、照射口に結露が発生する場合があります。これは冷却効果による照射口表面の温度と環境温度の温度差によって発生するもので、故障ではありません。そのままご使用いただいて問題ありません。

使用周期(頻度)について

本製品は以下の使用頻度で使用されることをおすすめします。

ご使用開始から	1～2週目	→	週に1～3回まで
	3～5週目	→	週に1～2回まで
	5週目以降	→	月に1～2回まで

POINT

- 上記の頻度を参考に適度なペースで使用を続けると、徐々に体毛が薄く生えにくくなってきます。最初の数回はほとんど目に見える変化はありませんが、継続的に使用を続けることによって効果を実感しやすくなります。
- 効果の感じかたは、使用する部位や個人によって異なります。実際の毛の状況にあわせて調整してください。
- 本製品は、永久脱毛をするためのものではありません。

●本製品によるケアの効果と毛周期について…

本製品は、毎日使用すると早く効果が出るわけではありません。

体毛には、抜けて新たな毛が生え変わるまでのサイクルがあり、このサイクルを**毛周期**とよびます。

本製品による効果的なケアのためには、毛周期に合わせた適切なアプローチが必要です。

毛周期は以下の3段階に分かれます。

- ①毛の成長周期の中で最も根が太く、メラニン色素が濃い**「成長期」**
- ②毛の成長がとまるとともにメラニン色素も薄くなり、体毛が抜けて行くのを待っている**「退行期」**
- ③毛が完全に抜け落ち、次の成長期を迎えるまで毛が休んでいる状態の**「休止期」**

毛周期のうち、**「成長期」が最もケアに適しているといわれています。**

「退行期」と「休止期」にケアをしてもあまり効果を得られません。

ただし成長期の周期にあるムダ毛は、全体の中ではごく一部でしかなく、1回のケアで全てのムダ毛にアプローチすることはできないのです。

本製品を使用するのケアは、1回や2回では効果が実感できません。

効果に個人差があります。

お手入れ



警告

●清掃する前に、本体の電源を切り、電源プラグを抜いて、本体を冷ましてください。

- 柔らかく、清潔で乾いた布を使用して、照射口を拭き、清掃します。
- 本体の汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 食器洗い機で製品や付属品を掃除しないでください。
- スチールウール、研磨剤入りクリーナー（歯磨き粉など）、腐食性液体（ガソリン、エンジンオイル、アセトンなど）を使用して製品を洗浄しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

電源が入らない／照射レベルLEDが点灯しない	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。(P.7)
照射ボタンを押しても照射ができない	本体や照射口の温度が高くなっていませんか？ →本体や照射口の温度が下がるのを待ってから使用してください。(P.11) 照射口が皮膚に正しく当たっていますか？(密着検知LEDが点灯していますか) →密着検知LEDが点灯するまで、照射口を皮膚に近づけてください。(P.8, P.9)
ケア中に耐え難い痛みがある	ケアをする部分のムダ毛がきれいに剃られていますか？ →ケアをする部分のムダ毛をきれいに剃ってください。(P.7) 下記部分には本製品の使用は適していません。 →陰唇、膣、陰囊、肝炎、乳首、乳輪などの暗い肌の部分には、この製品を使用しないでください。 使用する照射レベルが高く設定されていませんか？ →照射レベルを下げてください。(P.6) 照射口にキズが付いたり、破損したりしていませんか？ →使用を中止して、カスタマーサービス課にお問い合わせください。
効果が低い・感じられない	照射レベルが低すぎる設定になっていませんか？ →照射レベルを少しずつ上げて、適したレベルを選んで使用してください。(P.6) 連射モード使用時の照射間隔の間に動いた箇所は十分に照射されず、効果にムラが出ます。 →連射モード使用時は、同じエリアを前後に2回スライドさせることで効果のムラが少なくなります。(P.10) 本製品がご使用される方のムダ毛の色にあっていない。 →ご使用になる方のムダ毛が明るい金色、灰色、赤または白である場合、照射しても効果が見られない場合があります。(P.6) 使用する頻度が不十分ではありませんか？ →すべてのムダ毛をうまく取り除くには、ご使用のタイミングやご使用方法を確認いただき、継続的にご使用ください。(P.11) 短期間のご使用では効果は期待できません。 →本製品は、継続して使用する必要があります。使用する部分や、使用する方の体格や毛包の成長サイクルなどの個人差により、効果は異なります。(P.11)

ケア後、照射部が赤くなる	体調や体質によって、一時的に赤みがでる場合があります。 →照射は中止して本体を冷感モードにして、照射した部位に当てて冷却してください。それでも皮膚の症状が治まらない場合は、使用を中止して、医師の診察を受けてください。
本体が熱くなる	長時間連続して使用すると、本体が高温になります。 →いったん電源を切り、十分に冷ましてから再度使用してください。
照射口に結露が発生する	冷却効果による照射口表面の温度と環境温度の温度差によって発生するもので、故障ではありません。(P.11)

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄する際は、必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

仕様

販売名	ルルドフェイスメイク クールフラッシュスムーザー (COOLFLASH SMOOTHER)
商品番号	AX-NBL503bk
製品サイズ	本体：(約) W60×L37×H195 (mm) ACアダプター+電源ケーブル長：約1500+1080mm
製品重量	約360g (アダプターを含まず)
OFFタイマー	約3分自動オフ
電気定格	AC100V 50/60Hz 待機時：約1.0W (瞬間最大：約100W)
アダプター定格	入力：AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力：DC24V 2.5A
保管温度	-10～60℃
使用環境温湿度	0～45℃ 5%～90%RH
生産国	日本

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルドフェイスメイク クールフラッシュスムーザー」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、
下記保証規約により無料修理をお約束いたします。
修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

品名 / 型番	ルルドフェイスメイク クールフラッシュスムーザー / AX-NBL503bk					
お買上げ年月日*	年	月	日	保証期間	お買上日より1年	本体
* お客様	お名前			* 販売店		
	ご住所					
TEL: ()			-			

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)