


## ダイジベッド

品番 AX-BE950

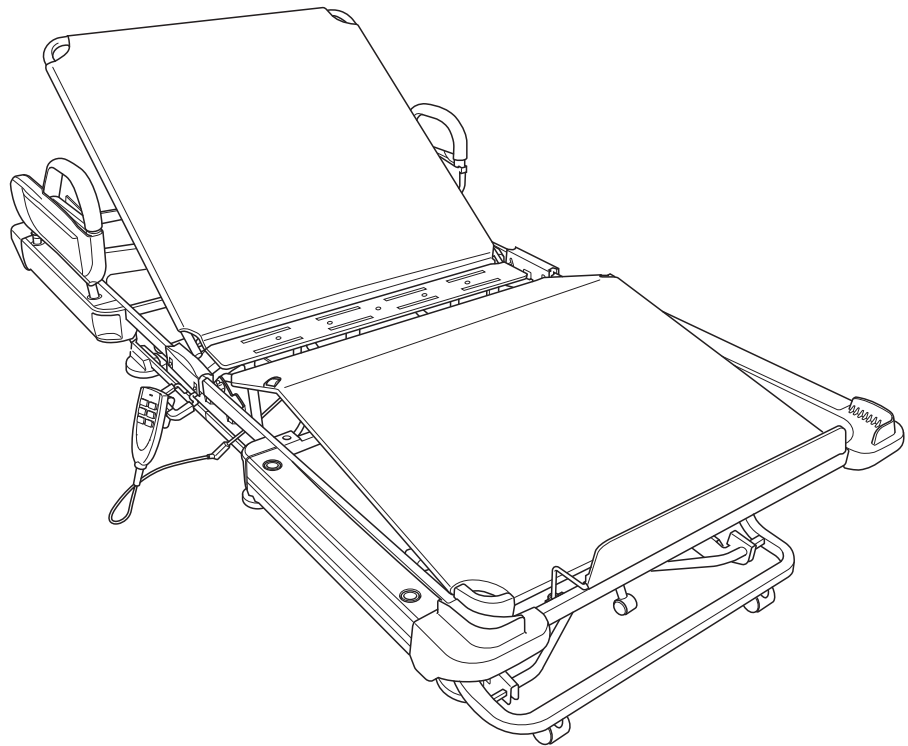

## 目次

⚠ 安全上のご注意	1 ~ 2	🧼 お手入れと保管方法	10
🔍 各部の名称	3	🔧 故障かなと思ったら	11 ~ 14
📋 部品一覧・別売品のご案内	4	⚙ 仕様	14
🛠 組み立て手順	5 ~ 7	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙
👤 使いかた	8 ~ 10		

このたびはAX-BE950をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
組み立て・ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられたあとも、大切に保管してください。  
※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

# ⚠ 安全上のご注意

組み立ての前やご使用前には、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

お読みになった後は必ず大切に保管しておいてください。

## 警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



### 禁止を促す記号

禁止



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



### 強制を促す記号

必ず守る

## ⚠ 警告



分解  
禁止

- 本製品やコントローラーの分解、改造、修理は危険ですので絶対にしないでください。故障や修理は販売店にご相談ください。



電源プラグ  
を抜く

- リクライニング操作中に異臭(こげ臭い)を感じたり、その他異常を感じたら直ちにコントローラーの操作を中止し、電源プラグを抜いておいてください。販売店にご相談ください。

- 長時間使用しないときやお出かけの際は誤作動や事故を防ぐため、電源プラグをコンセントから抜いてください。思わぬ事故や破損がおきるおそれがあります。

- 電源プラグを抜くときはコードを持たず先端のプラグを持ってください。コードの断線につながり、事故や破損・感電の原因になります。



禁止

- アクチュエーターやコントローラー、コードなどは破損した状態で使用しないでください。火災などの原因になります。

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。

- たこ足配線など定格を超える使い方や交流100V以外では使用しないでください。発熱、火災などの原因になります。



禁止

- 電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社カスタマーサービス課にお問い合わせください。



必ず  
守る

- 電源プラグのほこりは定期的に取り除いてください。火災、ショートの原因になります。

- ベッドの下にもぐり込まないでください。ケガをするおそれがあります。

- お子様や意思表示のできない方にコントローラーを絶対触らせないようにしてください。思わぬ事故が起きるおそれがあります。



はさみこみ  
注意

- リクライニング操作中はサイドレールやフレームのすきまに身体の一部を入れないでください。ケガをするおそれがあります。

- サイドレールや付属品とのすき間に注意してください。身体の一部(頭・首・手・足など)がはさまれ、ケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意



- 組み立て中・ベッドの開閉中に指などを挟まないように十分注意してください。ケガをするおそれがあります。



- ベッドの上で飛び跳ねたりしないでください。特にお子様などがトランポリン遊びをしないようにしてください。思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

- 機械油など油成分や化学薬品などの成分が浮遊している場所では使用しないでください。事故が起きるおそれがあります。

- ストーブまたは可燃性の物や火気の近くでは使用しないでください。事故や火災になるおそれがあります。

- 本製品は一般家庭用です。業務用および本来の目的以外では使用しないでください。事故になるおそれがあります。

- ベッドを踏み台にしたり、重いものを載せたりしないでください。思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

- 別売サイドサポートご使用時、故意に荷重を加えないでください。反対側が浮き上がり、不安定な状態となります。思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

- 別売サイドサポートご使用時、サイドサポート部に座ったり立ったりしないでください。思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



- 背部や足部を上げた状態のとき、背部・足部の上で立ち上がらないでください。思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。



- ベッドはラグなどの上に設置してください。畳やフローリング(木製床)などにキズをつけるおそれがあります。

- ベッドは突起物のない、平らな場所に設置してください。思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

- ベッドの設置は壁や家具などから十分な距離を取ってください。壁や家具などキズを付けるおそれがあります。

- 本製品はシングルベッドです。お一人で使用してください。また、体重が90kg以上の方は使用しないでください。思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

- ベッドを移動させるときは、必ず大人の方がおこなってください。また、移動時はキャスターの回転方向にも注意して、ゆっくり移動してください。フローリング(木製床)などをキズつけるおそれがあります。

- ベッドを長期間閉じておく場合は転倒に注意してください。思わぬ事故や破損がおきるおそれがあります。

### 組み立て時のご注意



- 本説明書をよく見て、あらかじめ内容を把握してから組み立ててください。

- 組み立ては大人の方が説明書に従って組み立ててください。

- 手をケガしないよう必要に応じて手袋をしてください。

- 組み立ての際は、近くにお子様やペットがいないか十分に注意してください。

- 組み立ての際は、手や指をはさまないように十分に注意してください。

### 使用上のご注意



- コントローラーの操作は、必ず大人の方が行ってください。また、周囲にお子様やペットなどがいないことを確認して行ってください。思わぬ事故の原因になります。



- うつ伏せや横向きの状態でご使用のとき、背もたれを上げないでください。事故やケガのおそれがあります。


- ベッドの開閉をおこなう時はサポートグリッドから手を放したりしないでください。破損の原因やケガのおそれがあります。

- 背部リクライニング部分や足部フットアップ部分に、腰を掛けたり座ったりして作動させないでください。故障の原因や事故、ケガのおそれがあります。


# 各部の名称

組み立て前にこの完成図をよく見て、あらかじめ組立完了状態を把握しておいてください。

## 前面


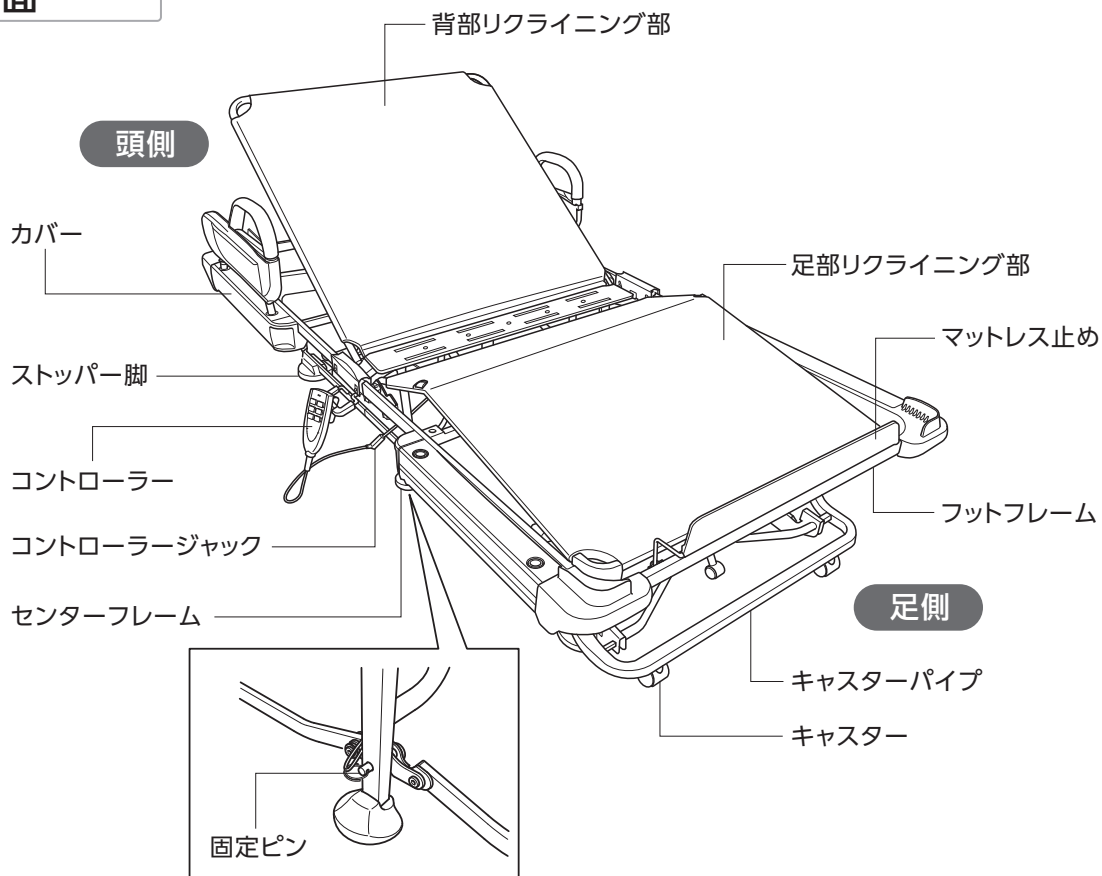


## 背面

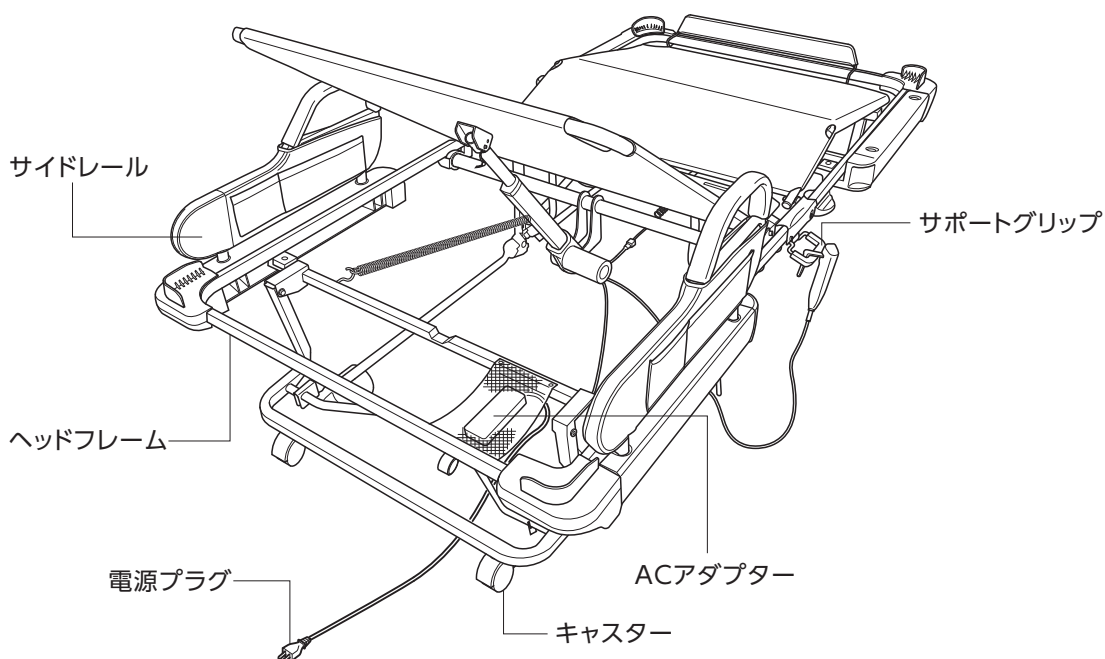

# 🔩 部品一覧・別売品のご案内

組み立て前に部品がすべて揃っているか、確認してください。

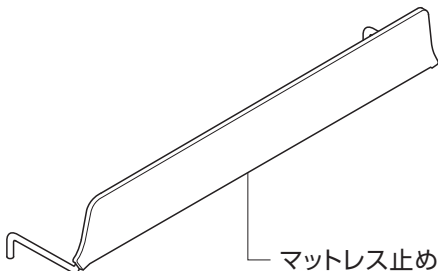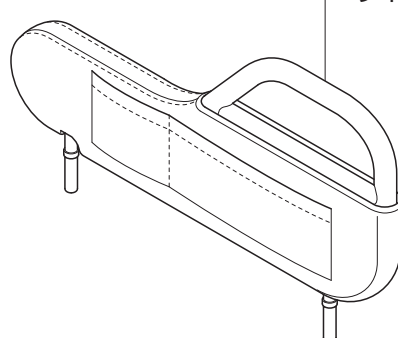
マットレス止め	サイドレール
 <p>マットレス止め×1</p>	 <p>サイドレール×2</p>

## 別売部品のご案内

本商品には以下の別売部品をそろえております。


AX-BM490

寝返りサポートマットレス

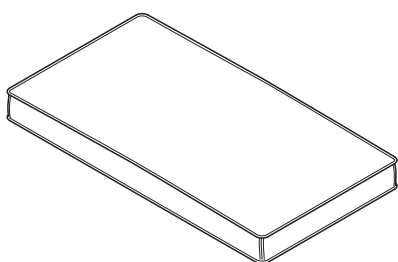


AX-BZ95

サイドレール (2個入り)

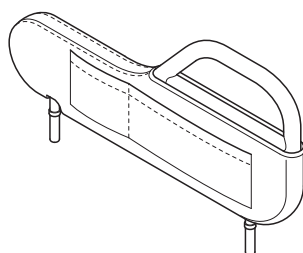

AX-BZ96

サイドサポート (2個入り)

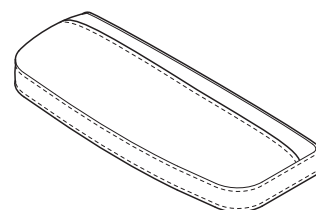

# 組立手順

組み立て前には必ず、P2「組み立て時のご注意」をお読みください。



## 組み立ての準備

**1** 梱包箱より部品を取り出し、すべてそろっているかを確認します  
(「部品一覧」⇒P4参照)

**2** 梱包箱からベッド本体をゆっくり起こしベッドを広げます

・ベッド本体をゆっくりと起こします。

・片方の手でサポートグリップを握り、もう片方の手でフレームの下方のカバーに手を添え、外側へ広げます。

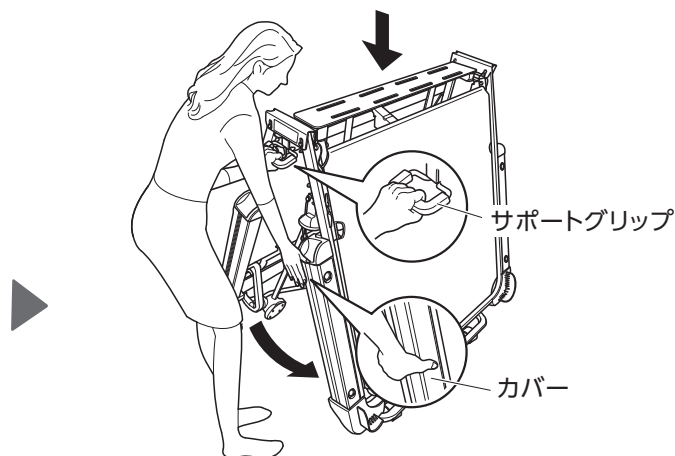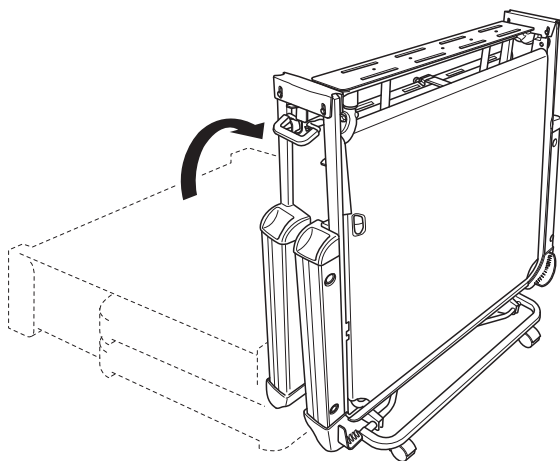


### ⚠ 注意

- ベッド本体を広げる時はサポートグリップから手を放したりしないでください。破損の原因やケガのおそれがあります。

**3** 固定ピンを差し込みます


### ⚠ 注意

- 固定ピンはベッドの浮き上がり防止のためのものです。必ずご使用ください。
- センターフレームやストッパー脚 (⇒P3参照) で各コードを踏まないようご注意ください。

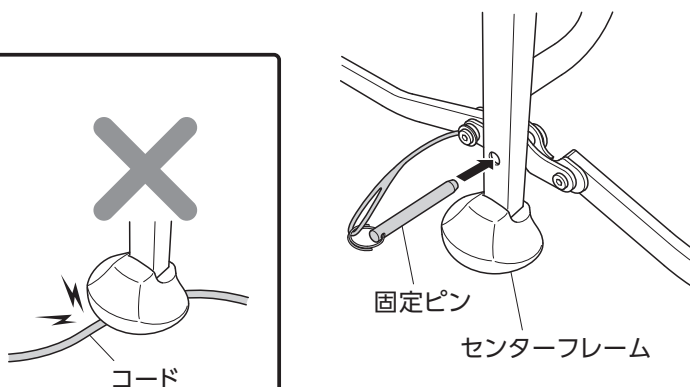



## 4 サイドレールを取付穴に差し込みます

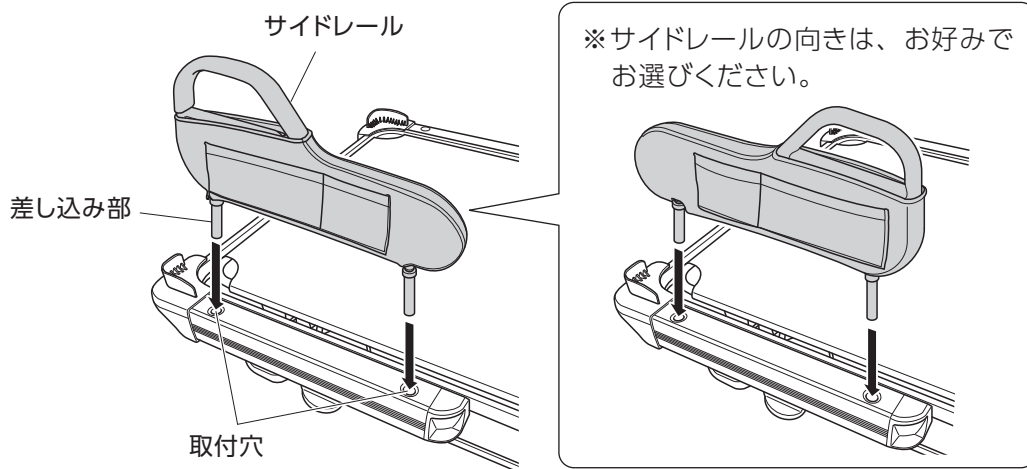


### ⚠ 注意


- サイドレール差し込み部が取付穴 (2ヶ所) に確実に差し込まれているか確認してください。片方しか差し込まれていない場合、ケガや破損の原因となります。

### POINT


- サイドレールに向きはなく、下図の丸印4カ所の好きな位置に取り付けられます。

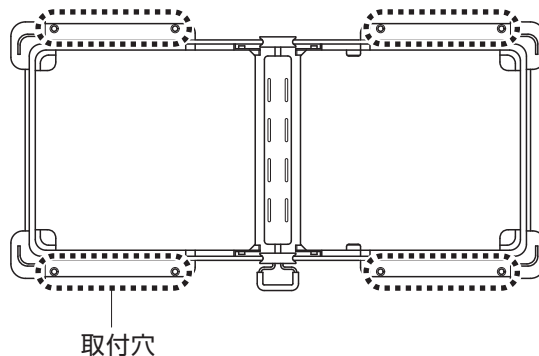

- サイドレールを差し込まない場合は、カバーの上下を変えることで取付穴を隠すことができます。

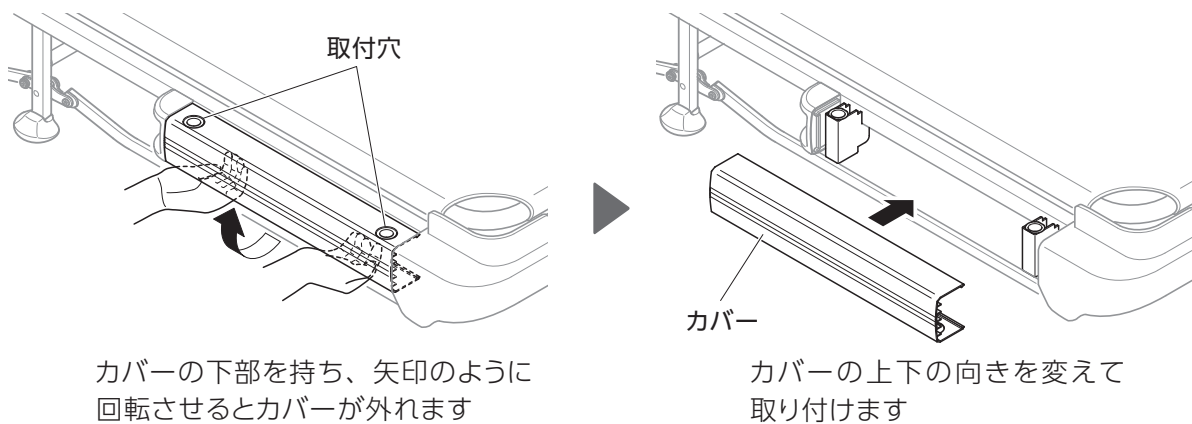

## 5 マットレス止めを取付穴に差し込みます

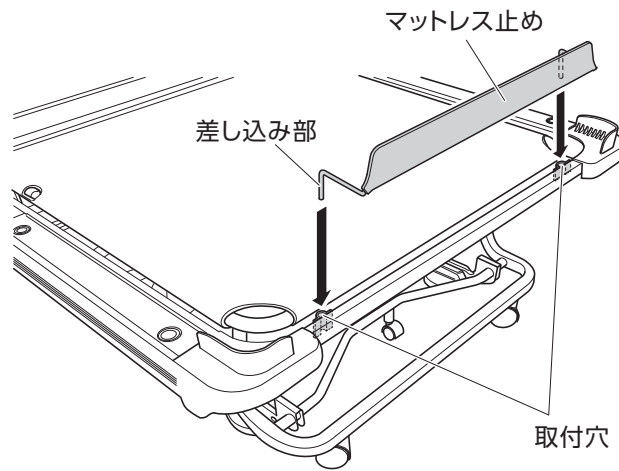

### ⚠ 注意

- マットレス止め差し込み部が取付穴 (2ヶ所) に確実に差し込まれているか確認してください。片方しか差し込まれていない場合、ケガや破損の原因となります。

## 6 お手持ちのマットレスを敷きます




# 👤 使いかた

操作前には必ず、P1～2「安全上のご注意」をお読みください。

## コントローラーの使いかた

### 電源プラグをコンセントに差し込みます

・正しく確実に差し込んでください。

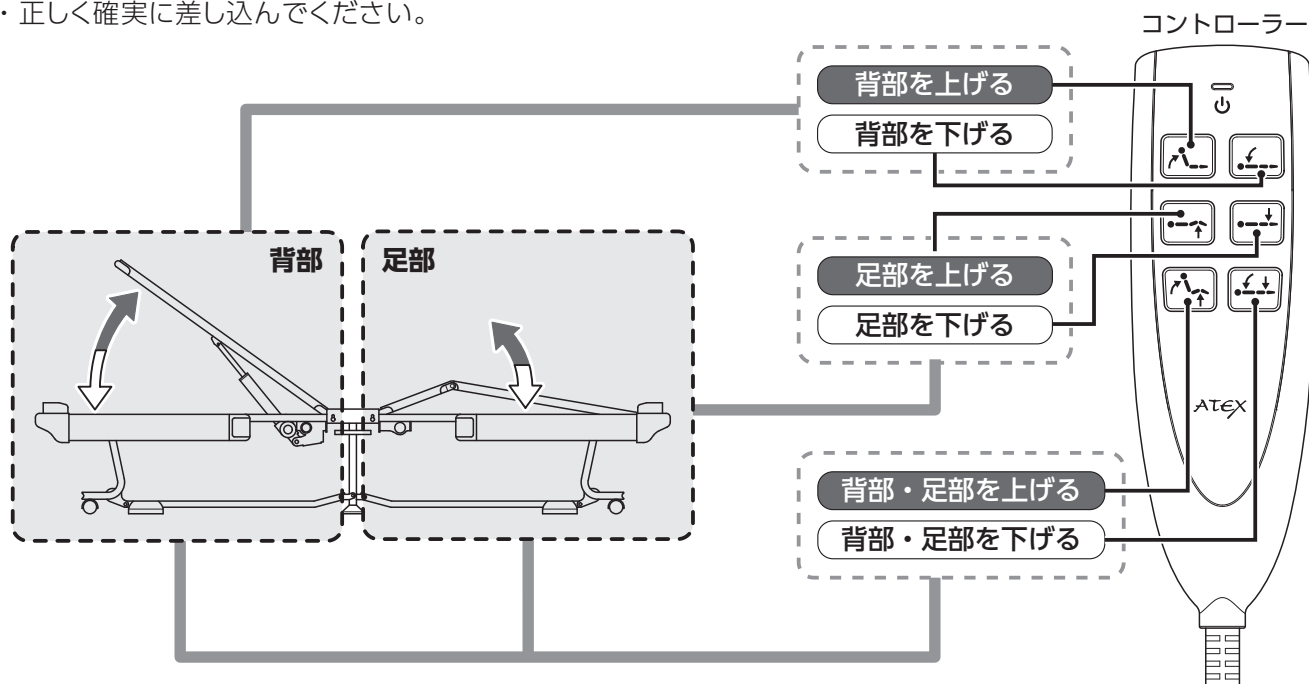


### ⚠️ 警告

- 長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。  
誤操作や接触によりベッドが動き、事故の原因になります。
- 下図の①サイドレールのすき間に注意してください。  
身体の一部（頭・首・手・足など）が挟まれ、けがをするおそれがあります。

### ⚠️ 注意

- リクライニングしている状態で下図の②背部リクライニング部、  
③足部フットアップ部の上に乗ったり座ったりは絶対にしないでください。  
故障や、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

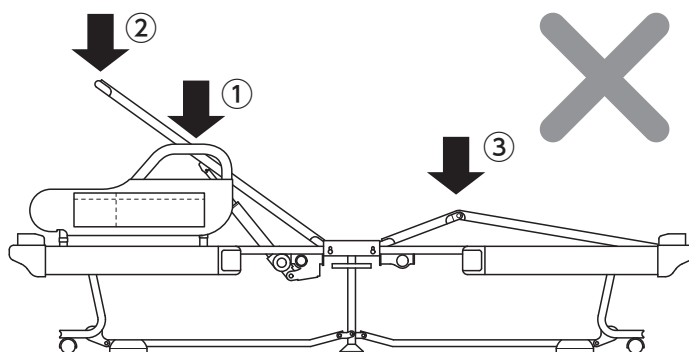

# 👤 使いかた

## ベッドの開きかた



- 1 電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します
- 2 片方の手でサポートグリップを握り、もう片方の手でベッドフレームの下方のカバーに手を添え、外側へ広げます

### ⚠️ 注意

- ベッド本体を広げる時はサポートグリップから手を放したりしないでください。破損の原因やケガのおそれがあります。

- 3 固定ピンを差し込みます

- 4 マットレスを敷きます

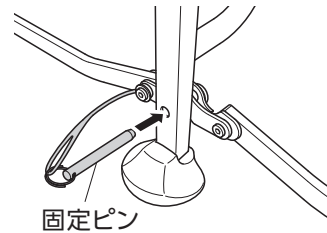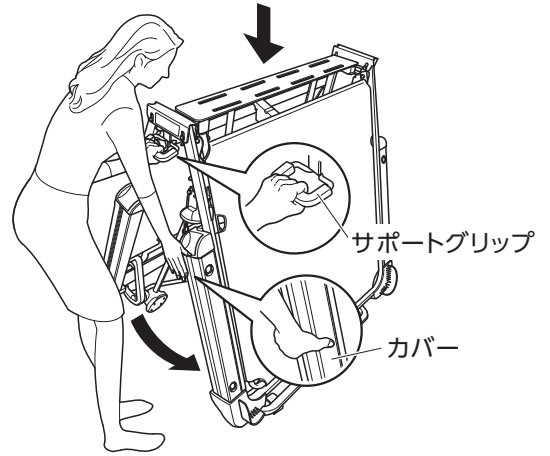



## ベッドの閉じかた

- 1 マットレスを外します
- 2 電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します
- 3 固定ピンを抜きます
- 4 サポートグリップを握り、ベッド中央を持ち上げます

ベッドが上がってくると、片側の手をフレーム下方のカバーに手を添えて、ベッドが移動しないようにして閉じます。

### ⚠️ 注意

- ベッド本体を閉じる時はサポートグリップから手を放したりしないでください。破損の原因やケガのおそれがあります。

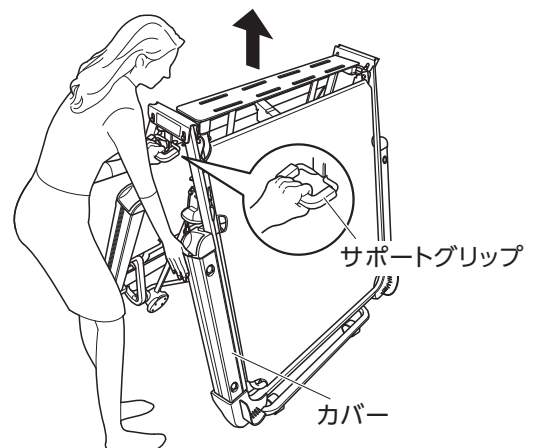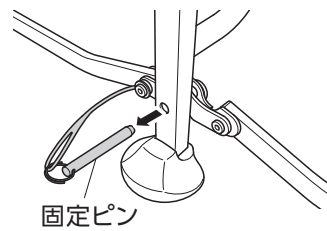

## ベッドの移動のしかた


1 電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します

2 両手でベッドを支えながら押します

キャスターの回転方向に注意しながら、ゆっくりと移動してください。

### ⚠ 注意

- 移動は大人2人以上で行ってください。ベッドは重量があるため、周りに十分注意してください。また、床材の種類によっては床にキズが付くことがあります。
- 移動のときコード類や足先がキャスターに巻き込まれないよう注意してください。
- ベッドは広げた状態で移動しないでください。ストッパー脚が床材と擦れてキズが付くおそれがあります。

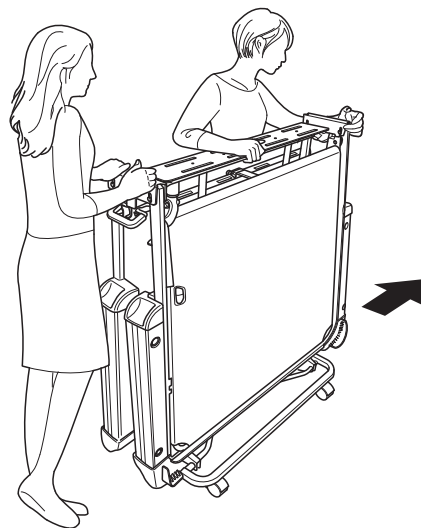

## 🧤 お手入れと保管方法

- 中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭いてください。
- 保管の場所は、直射日光が長時間あたる所、ストーブの近く、多湿の所は避けてください。

# 🔧 故障かなと思ったら

## リクライニングの解除のしかた


不意の出来事により、各リクライニングが作動しなくなった場合、以下の手順で起き上がったフレームを平らな状態に戻すことができます。

### ⚠️ 注意


- これらの説明は、あくまで応急の対応となります。
- 作業はマットレスを取り外しておこなってください。
- 作業は必ず2人以上でおこなってください。
- 作業が終わりましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ●背部

#### 1 1人がリクライニング部を手で持ち上げて上方へ支えます

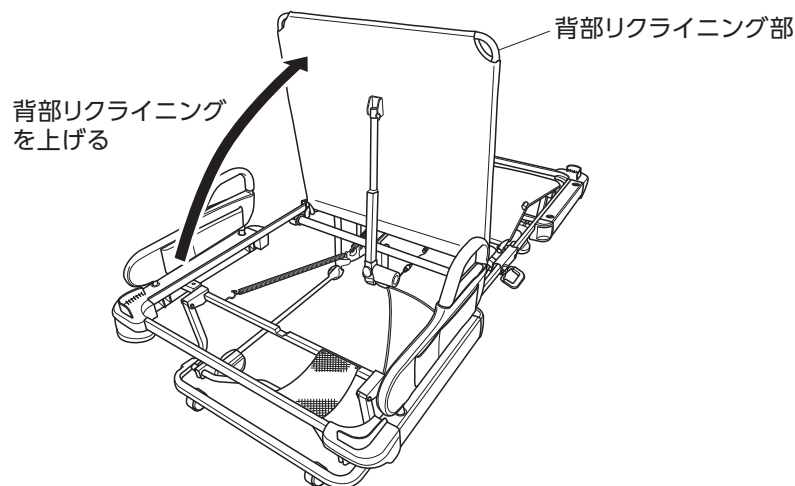


#### 2 アクチュエーター先端部を固定しているピンから、スナップリングを外します

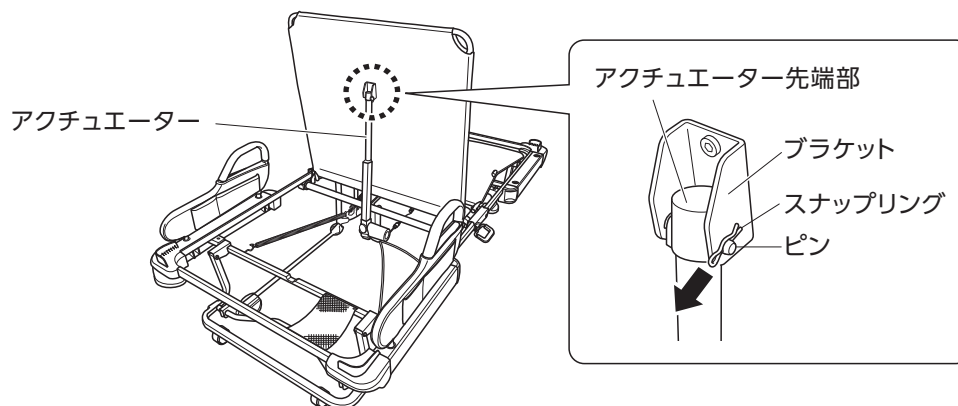

### 3 1人がリクライニング部を支えたままで、もう1人がピンを引き抜き、アクチュエーター先端部をブラケットから取り外し、ゆっくりと下ろします

※ピンの引き抜きが固い場合は、背部リクライニング部を前後に動かすと外れやすくなります。

※取り外したアクチュエーター部はヘッドフレームくぼみに置きます。

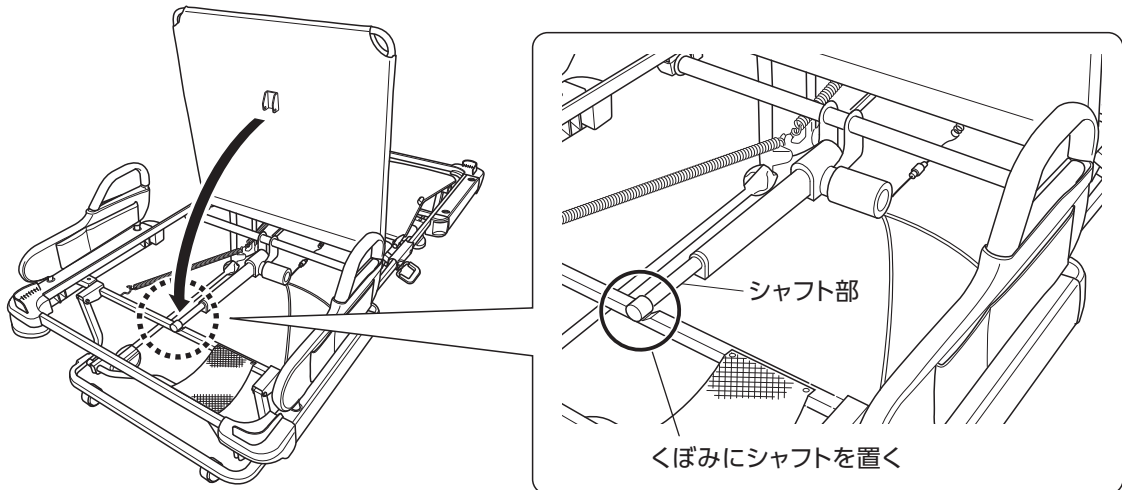

※背上げ角度によってはシャフト部がくぼみに届かない場合があります。

### 4 背部リクライニング部をゆっくり下ろします

#### ⚠ 注意


- 取り外したスナップリング、ピンは大切に保管ください。
- 取り付け方法は取り外した逆の手順で行ってください。
- アクチュエーターを取り外した状態でベッドを閉じないでください。

# 🔧 故障かなと思ったら

## ●足部

### 1 アクチュエーター先端部を固定しているピンからスナップリングを外します


※作業は、1人が足部リクライニング部の端部を持ち上げながらおこなってください。

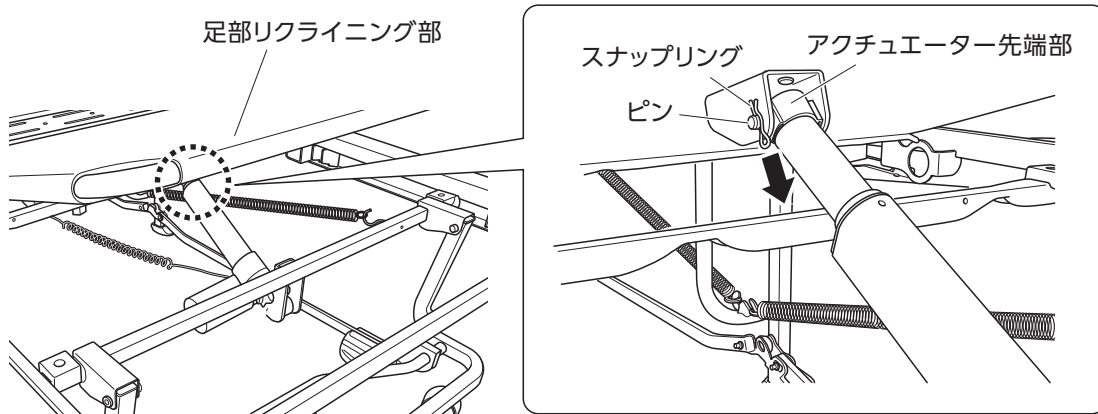

### 2 1人がリクライニング部を支えたままで、もう1人がピンを引き抜き、アクチュエーター先端部をブラケットから取り外し、ゆっくりと床に置きます

※ピンの引き抜きが固い場合は、リクライニング部を動かすと外れやすくなります。

※アクチュエーターの先端部で床が傷つかないように注意してください。

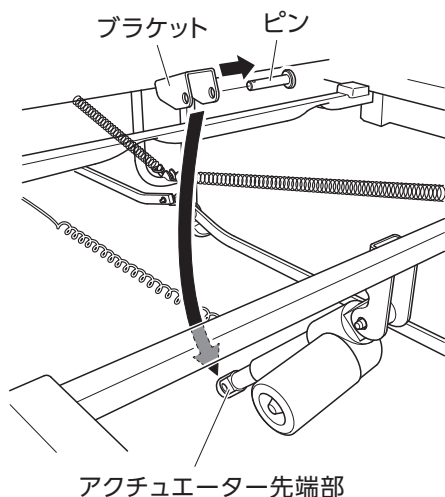

### 3 足部リクライニング部をゆっくり下ろします

#### ⚠️ 注意

- 取り外したスナップリング、ピンは大切に保管ください。
- 取り付け方法は取り外した逆の手順で行ってください。
- アクチュエーターを取り外した状態でベッドを閉じないでください。

修理に出す前に以下についてもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

**コントローラーのボタンを押してもまったく動かない**

- 電源コードの電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていますか？  
電源コードの電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
- コンセントに電気が通っていますか？  
コンセントに他の器具を接続して電気が通っているか確認してください。
- コントローラーと電源コードのジャックがモーターからはずれていませんか？  
コントローラーのジャックを確実に差し込んでください。
- ACアダプターに電気が通っていますか？  
電源コードとACアダプターを確実に差し込んでください。ACアダプターに電気が通っているときは、ACアダプターのランプが点灯します。


※上記以外の原因で動かなくなったときは、コントローラーの故障が考えられます。下記の「コントローラーの外しかた」を参照してコントローラーを取り外し、コントローラーの修理をお買い求めの販売店に依頼してください。

**コントローラーの外しかた**

**1** 電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します。

**2** コントローラー側のプラグをまっすぐ引き抜きます。

※取り付けるときはジャックの向きに注意して確実に差し込んでください。

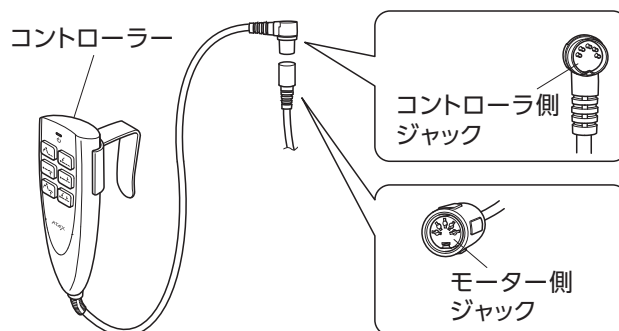

**仕様**

品名	ダイジベッド
品番	AX-BE950
製品重量	約 41.5kg
製品サイズ	(約)W1000 × L1960 × H630 (mm)
床面高さ	約360mm
電気定格	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	120W
通常使用荷重	90kg以下
素材	本体：鋼(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)、PP、PE、ABS、合成皮革 ポリエステル(100%)メッシュ生地
生産国	中国
製造元	株式会社 アテックス



# ♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼される場合は保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ダイジベッド」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

## 保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。  
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

### 株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

品名 / 品番	ダイジベッド / AX-BE950					
お買上げ年月日*	年	月	日	保証期間	お買上日より1年	本体
★ お客様	お名前		様	★ 販売店		
	ご住所					
TEL: (      )		-				

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

### 保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる故障または損傷
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外 (例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載) に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社アテックス  
<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 九州物流センター  
〒830-0222 福岡県久留米市城島町青木島438-1

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)