

組み立て・取扱説明書


保証書付

保管用

製造番号

電動リクライニングベッド

品番 AX-BEA709

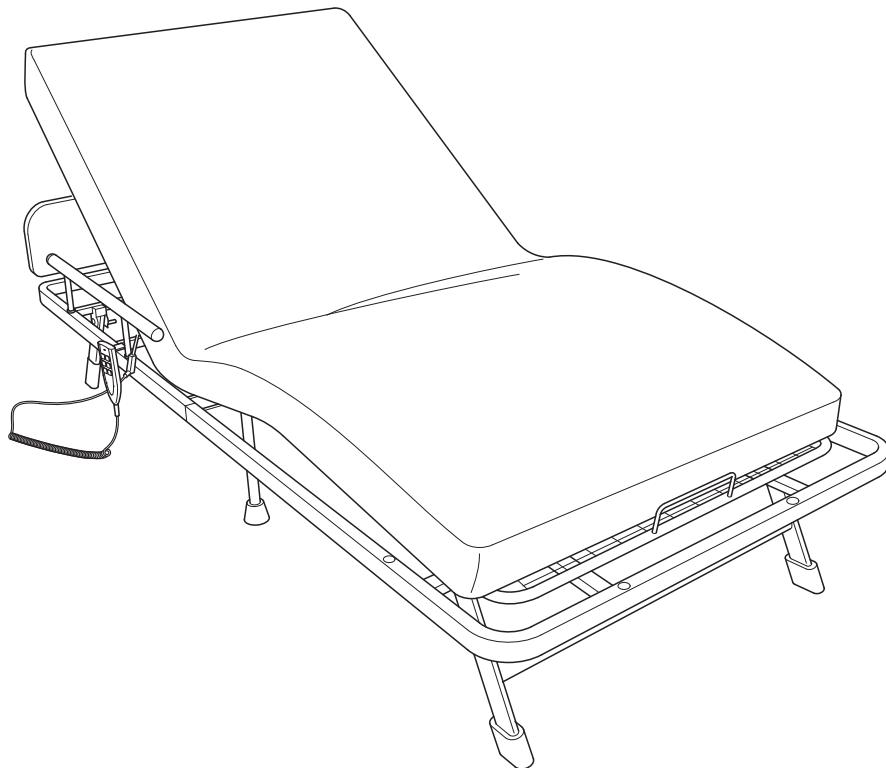

目次

⚠ 安全上のご注意	1 ~ 2	⌚ お手入れと保管方法	9
⌚ 各部の名称	3	🔧 故障かなと思ったら	9 ~ 13
⌚ 部品一覧	4	⚙ 仕様	13
⌚ 組み立て手順	5 ~ 7	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙
⌚ 使いかた	8		

このたびはAX-BEA709をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

組み立て・ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

⚠ 安全上のご注意

組み立ての前やご使用前には、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。
お読みになった後は必ず大切に保管しておいてください。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号

必ず守る

⚠ 警告



分解
禁止

- 本製品やコントローラーの分解、改造、修理は危険ですので絶対にしないでください。故障や修理は販売店にご相談ください。



電源プラグ
を抜く

- リクライニング操作中に異臭(こげ臭い)を感じたり、その他異常を感じたら直ちにコントローラーの操作を中止し、電源プラグを抜いておいてください。販売店にご相談ください。

- 長時間使用しないときやお出かけの際は誤作動や事故を防ぐため、電源プラグをコンセントから抜いてください。思わぬ事故や破損がおきるおそれがあります。

- 電源プラグを抜くときはコードを持たず先端のプラグを持ってください。コードの断線につながり、事故や破損・感電の原因になります。



禁止

- アクチュエーターやコントローラー、コードなどは破損した状態で使用しないでください。火災などの原因になります。

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。

- たこ足配線など定格を超える使い方や交流100V以外では使用しないでください。発熱、火災などの原因になります。



禁止

- 電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社カスタマーサービス課にお問い合わせください。



必ず
守る

- 電源プラグのほこりは定期的に取り除いてください。

火災、ショートの原因になります。

- ベッドの下にもぐり込まないでください。ケガをするおそれがあります。

- お子様や意思表示のできない方にコントローラーを絶対触らせないようにしてください。

思わぬ事故が起きるおそれがあります。



はさみこみ
注意

- リクライニング操作中はサイドグリップやフレームのすき間に身体の一部を入れないでください。

ケガをするおそれがあります。

- サイドグリップや付属品とのすき間に注意してください。

身体の一部(頭・首・手・足など)がはまれ、ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意



はさみこみ
注意



禁止

- 組み立て中に指などを挟まないように十分注意してください。
ケガをするおそれがあります。
- ベッドの上で飛び跳ねたりしないでください。特に子様などがトランポリン遊びをしないようにしてください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。
- 機械油など油成分や化学薬品などの成分が浮遊している場所では使用しないでください。
事故が起きるおそれがあります。
- ストーブまたは可燃性の物や火気の近くでは使用しないでください。
事故や火災になるおそれがあります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用および本来の目的以外では使用しないでください。
事故になるおそれがあります。
- ベッドを踏み台にしたり、重いものを載せたりしないでください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

組み立て時のご注意



必ず
守る

- 本説明書をよく見て、あらかじめ内容を把握してから組み立ててください。
- 組み立ては大人の方が説明書に従って組み立ててください。
- 手をケガしないよう必要に応じて手袋をしてください。
- 組み立ての際は、近くにお子様やペットがないか十分に注意してください。
- 組み立ての際は、手や指をはさまないよう十分に注意してください。



禁止



必ず
守る

- 背部や足部を上げた状態のとき、背部・足部の上で立ち上がりなさいでください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。
- ベッドはラグなどの上に設置してください。
畳やフローリング(木製床)などにキズをつけるおそれがあります。
- ベッドは突起物のない、平らな場所に設置してください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。
- ベッドの設置は壁や家具などから十分な距離を取ってください。
壁や家具などキズを付けるおそれがあります。
- 本製品はシングルベッドです。お一人で使用してください。また、体重が90kg以上の方は使用しないでください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

使用上のご注意



必ず
守る




禁止

- コントローラーの操作は、必ず大人の方が行ってください。
また、周囲にお子様やペットなどがいないことを確認して行ってください。
思わぬ事故の原因になります。
- うつ伏せや横向きの状態でご使用のとき、背もたれを上げなさいでください。
事故やケガのおそれがあります。
- 背部リクライニング部分や足部フットアップ部分に、腰を掛けたり座ったりして作動させなさいでください。
故障の原因や事故、ケガのおそれがあります。


Q 各部の名称

組み立て前にこの完成図をよく見て、あらかじめ組み立て完了状態を把握しておいてください。

前面

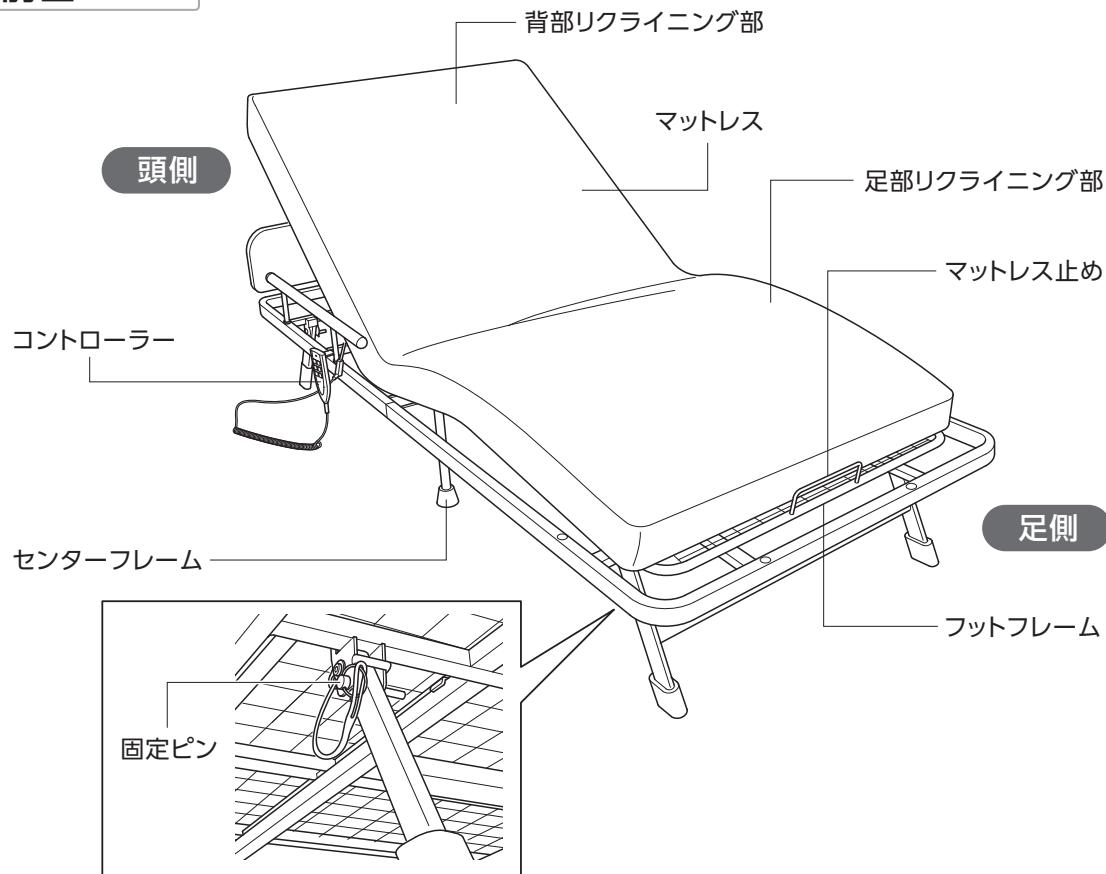






背面

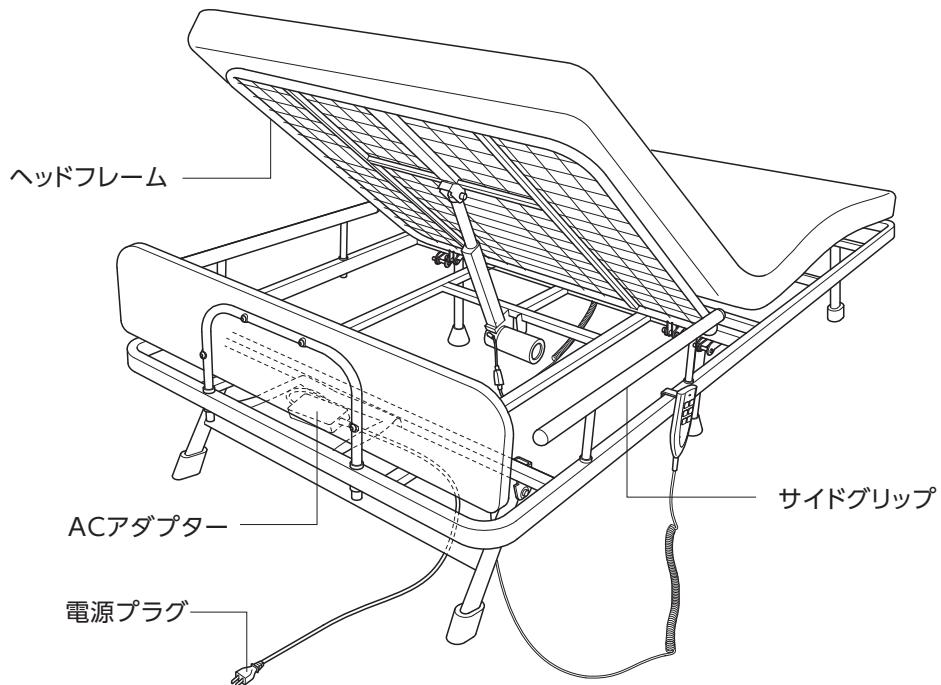



部品一覧

組み立て前に部品がすべて揃っているか、確認してください。

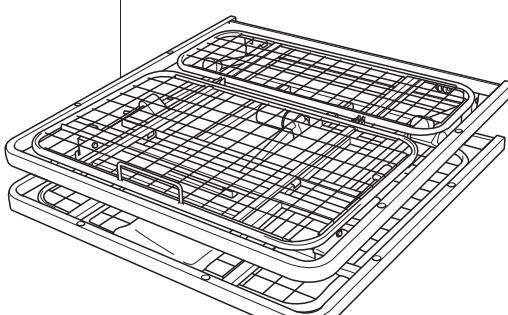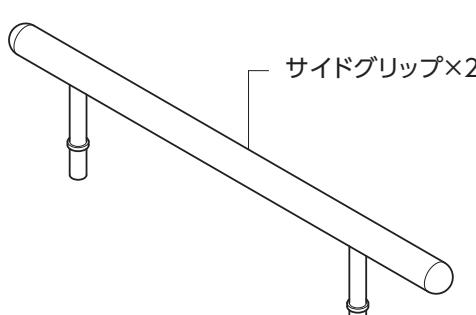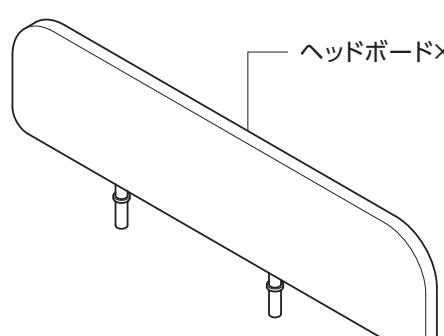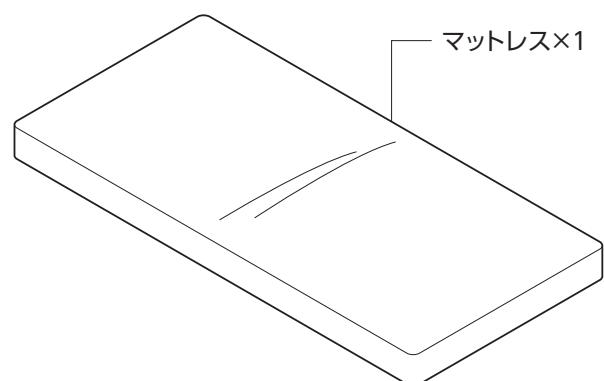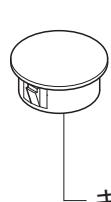本体フレームユニット	サイドグリップ
 ※電源コード、ACアダプター、コントローラーは、あらかじめこの本体ユニットに接続されています。	
ヘッドボード	マットレス
	
キャップ	
	


組み立て手順

組み立て前には必ず、P2「組み立て時のご注意」をお読みください。
組み立ては2人での作業を推奨します。

組み立ての準備


1 梱包箱より部品を取り出し、すべてそろっているかを確認します

(「部品一覧」⇒P4参照)

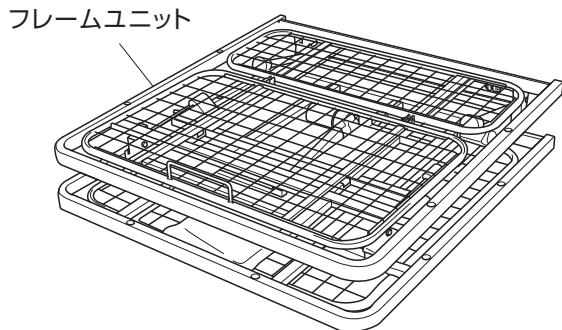



2 フレームユニットを起こします

※床面傷防止として梱包ダンボールを敷くことを推奨しています。

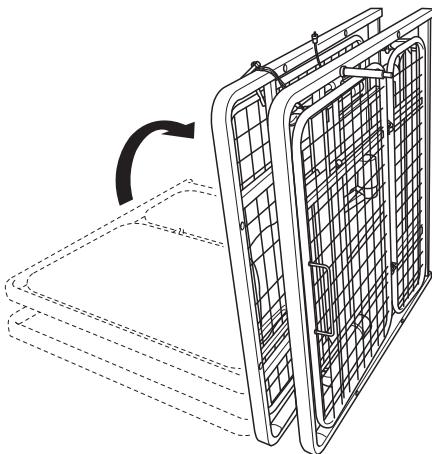


3 フレームユニットを半分ほど開いて、 フレームユニットの脚を開き固定ピン(4ヶ所)を差し込みます

・固定ピンが確実に奥まで差し込まれているか確認してください。

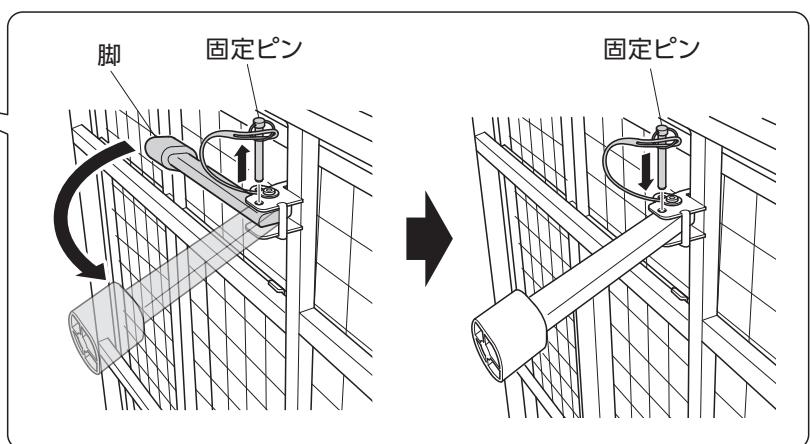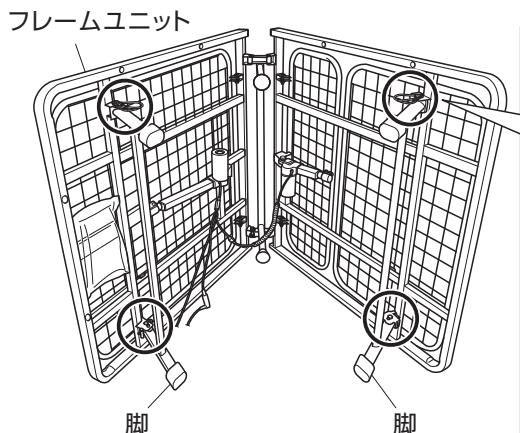


4 フレームユニットを完全に開きます

- ・固定ピンが抜けないように注意して作業してください。

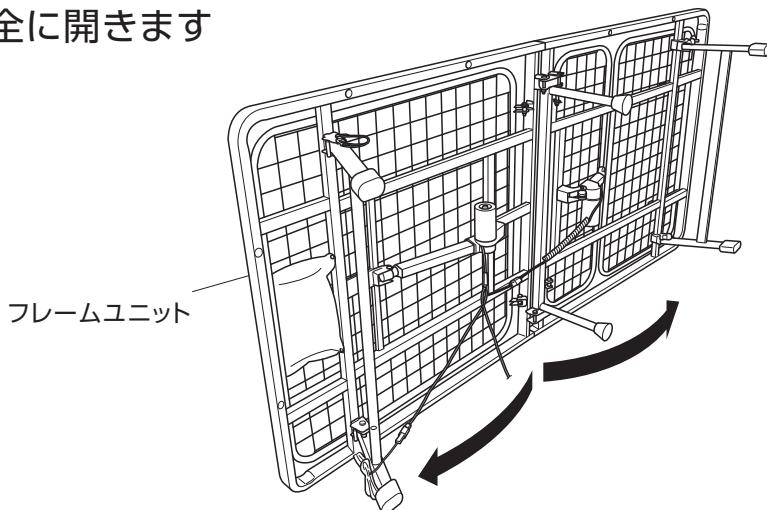


5 フレームユニットを倒します

- ・フレームの頭側・足側を確認してください。

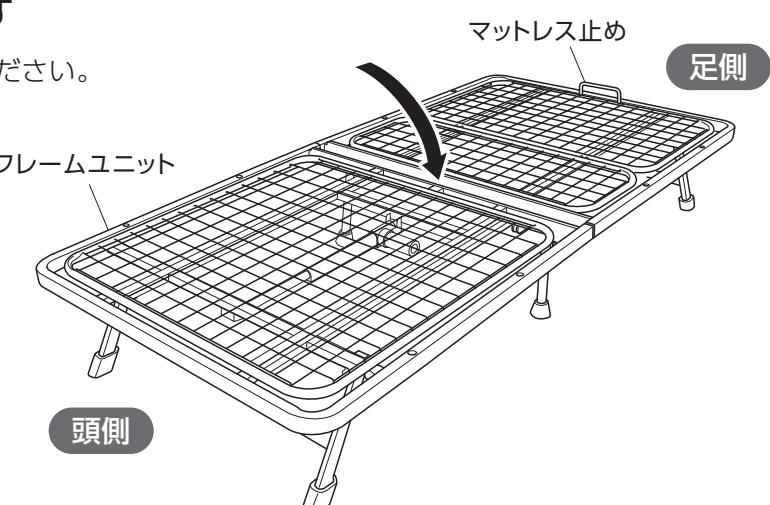

6 ヘッドボードを取り付け穴に差し込みます

- ・ヘッドボードは足側にも差し込めますが、頭側を推奨しています。

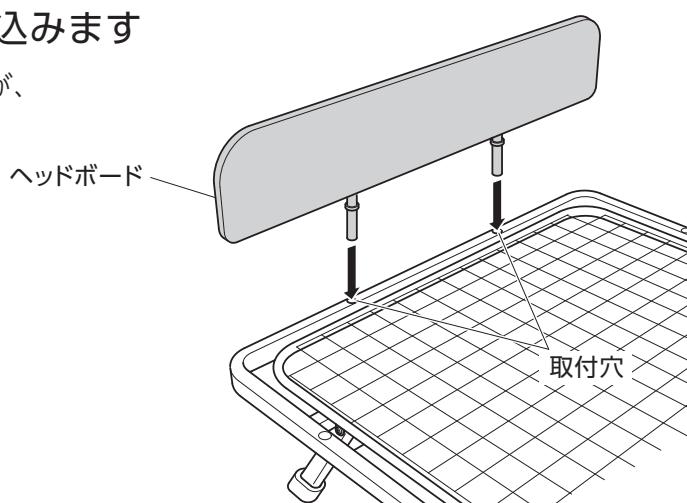


⚠ 注意

- ヘッドボードが取付穴（2ヶ所）に確実に差し込まれているか確認してください。
片方しか差し込まれていない場合、ケガや破損の原因となります。

組み立て手順

7 サイドグリップを取り付けてください

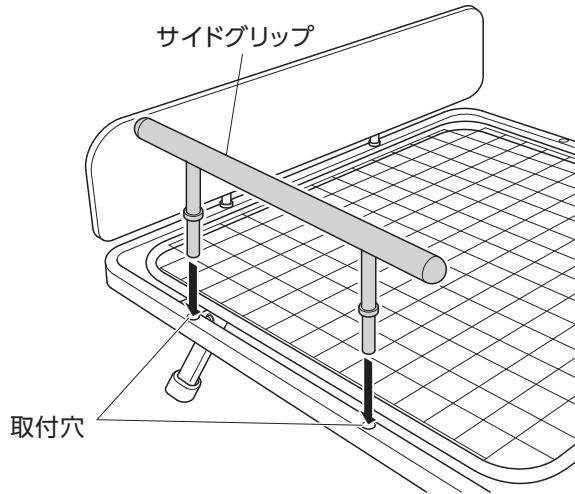


⚠ 注意


- サイドグリップ差し込み部が取付穴（2ヶ所）に確実に差し込まれているか確認してください。片方しか差し込まれていない場合、ケガや破損の原因となります。

POINT


- サイドグリップに向きはなく、下図の丸印4カ所の好きな位置に取り付けられます。

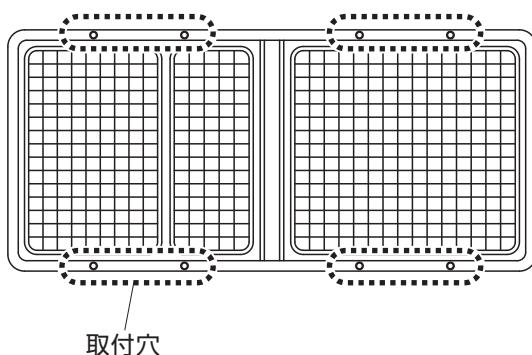

※ 使用しない取付穴にはキャップを差し込んでください。

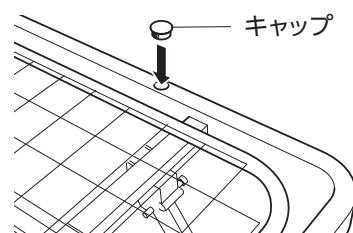

8 マットレスを敷きます

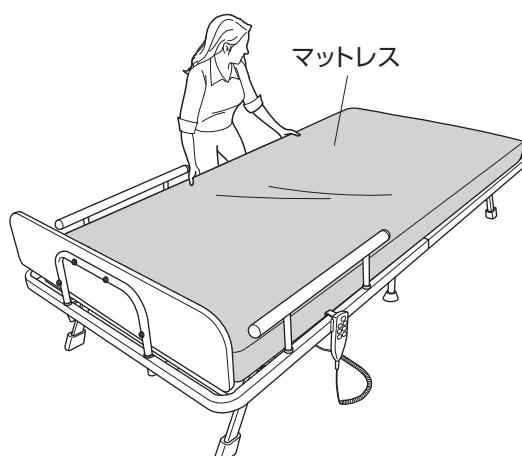


使いかた

操作前には必ず、P1～2「安全上のご注意」をお読みください。

コントローラーの使いかた

電源プラグをコンセントに差し込みます

- 正しく確実に差し込んでください。

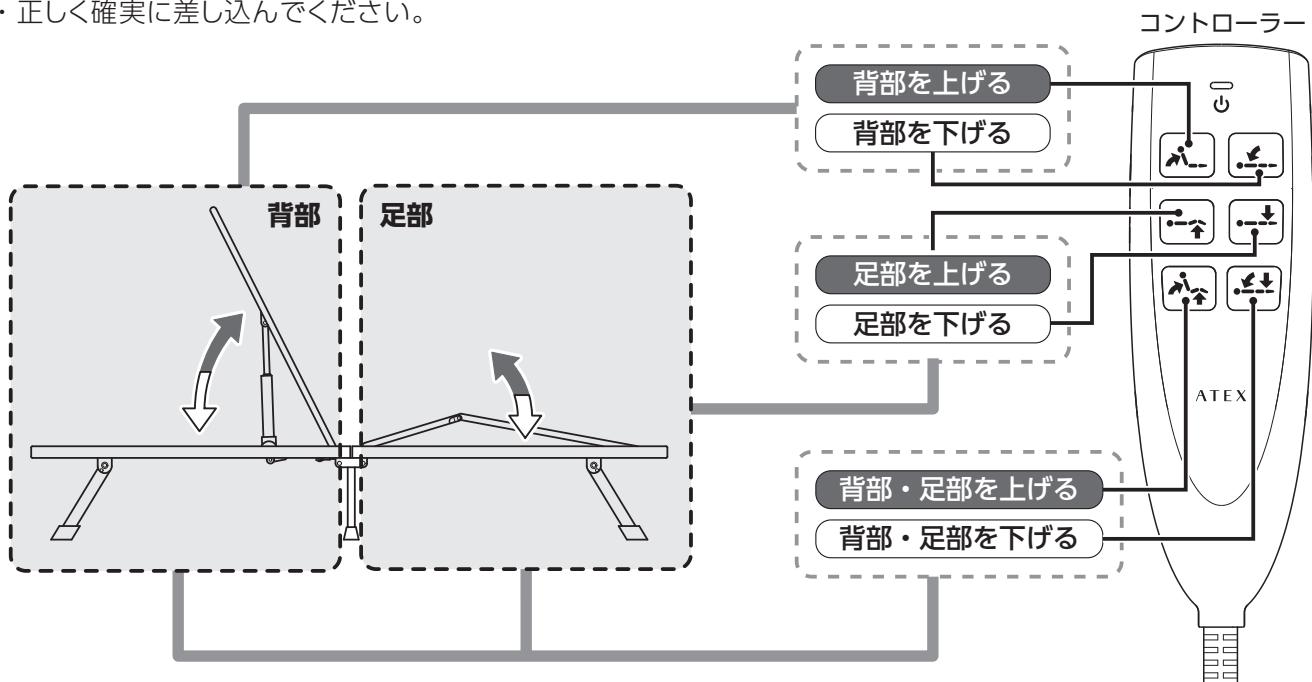


!**警告**

- 長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
誤操作や接触によりベッドが動き、事故の原因になります。
- 下図の①サイドグリップのすき間に注意してください。
身体の一部(頭・首・手・足など)が挟まれ、けがをするおそれがあります。

!**注意**

- リクライニングしている状態で下図の②背部リクライニング部、
③足部フットアップ部の上に乗ったり座ったりは絶対にしないでください。
故障や、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

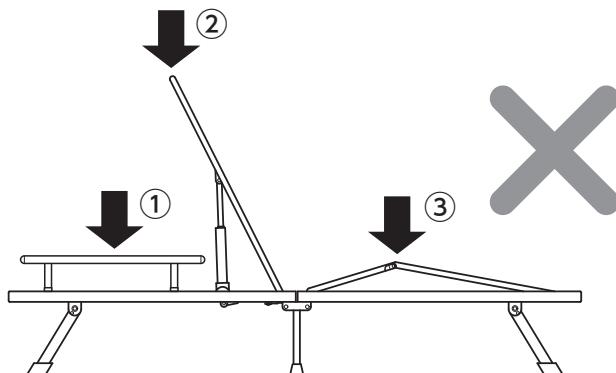

お手入れと保管方法

- 中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭いてください。
- 保管の場所は、直射日光が長時間あたる所、ストーブの近く、多湿の所は避けてください。

故障かなと思ったら

リクライニングの解除のしかた


不意の出来事により、各リクライニングが作動しなくなった場合、以下の手順で起き上がったフレームを平らな状態に戻すことができます。

注意


- これらの説明は、あくまで応急の対応となります。
- 作業はマットレスを取り外しておこなってください。
- 作業は必ず2人以上でおこなってください。
- 作業が終わりましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。

●背部

1 1人がリクライニング部を手で持ち上げて上方へ支えます

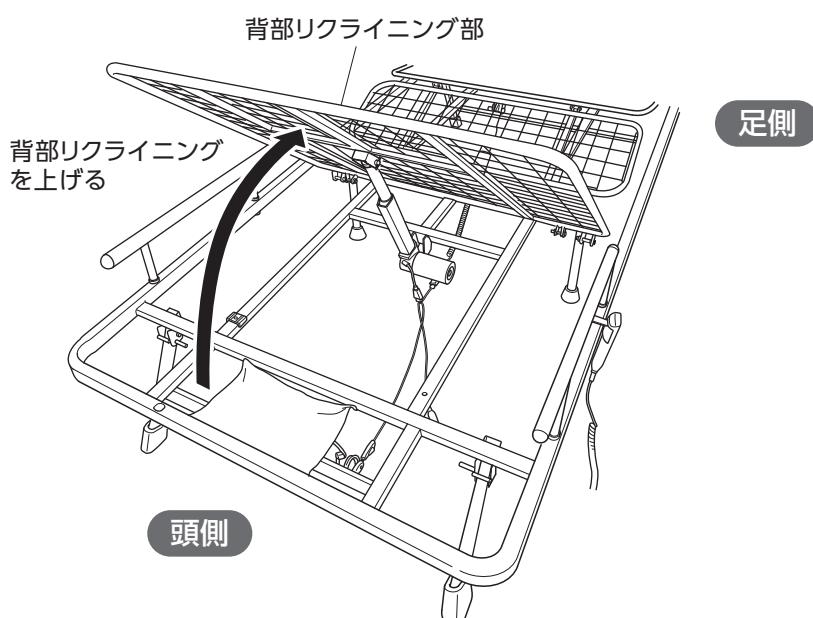


2 アクチュエーター先端部を固定しているピンから、スナップリングを外します

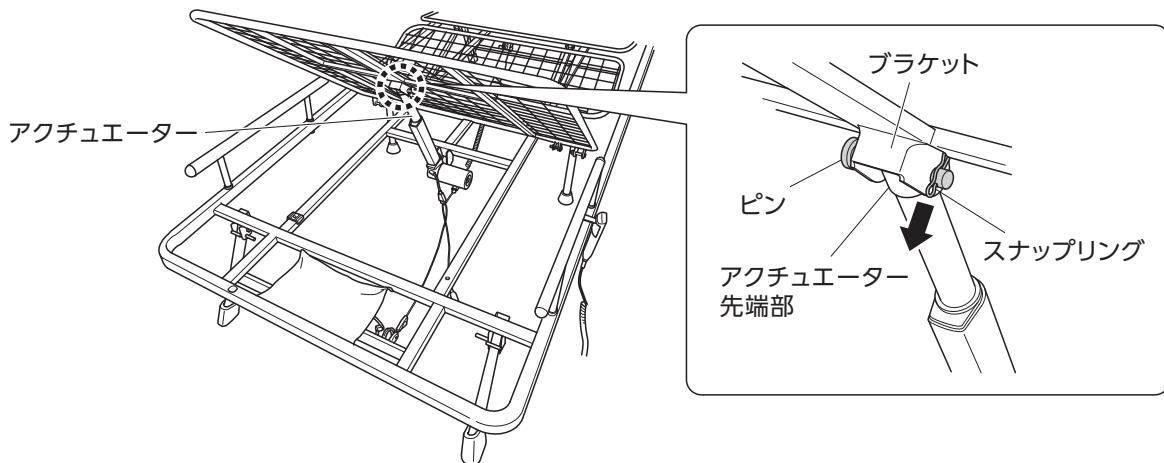

3 1人がリクライニング部を支えたままで、もう1人がピンを引き抜き、 アクチュエーター先端部をブラケットから取り外し、ゆっくりと床に置きます

※ピンの引き抜きが固い場合は、背部リクライニング部を前後に動かすと外れやすくなります。

※アクチュエーターの先端部で床が傷つかないよう注意してください。

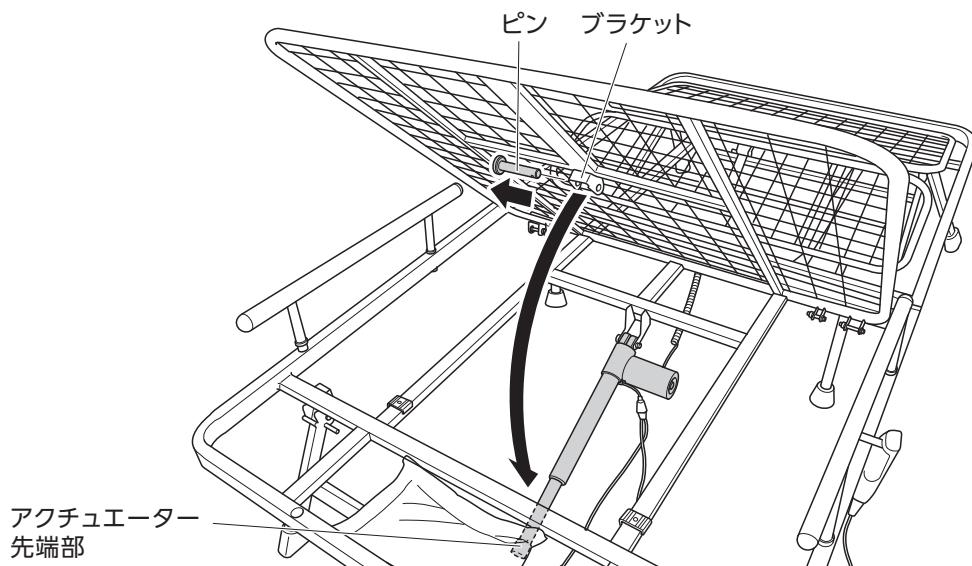

4 背部リクライニング部をゆっくり下ろします


⚠ 注意

- 取り外したスナップリング、ピンは大切に保管ください。
- 取り付け方法は取り外した逆の手順で行ってください。


🔧 故障かなと思ったら

●足部

- 1 1人がフットフレームを持ち上げます

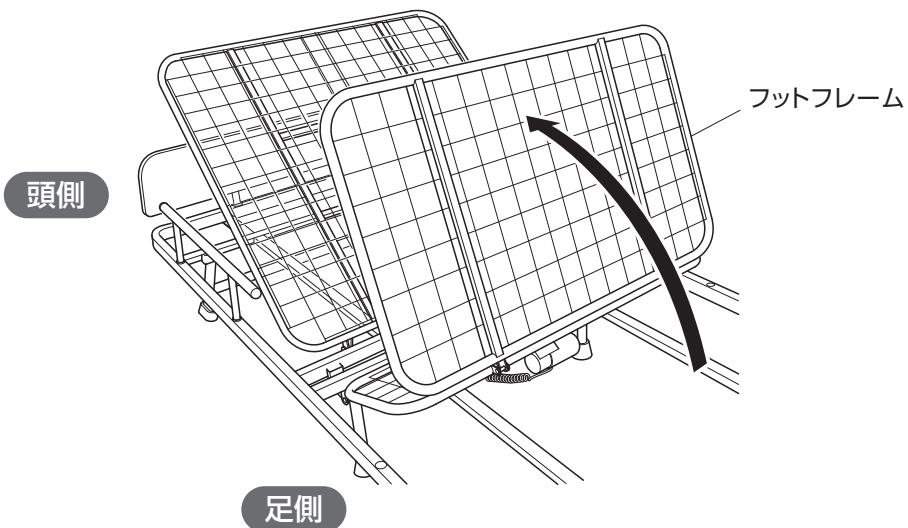


- 2 アクチュエーター先端部を固定しているピンからスナップリングを外します

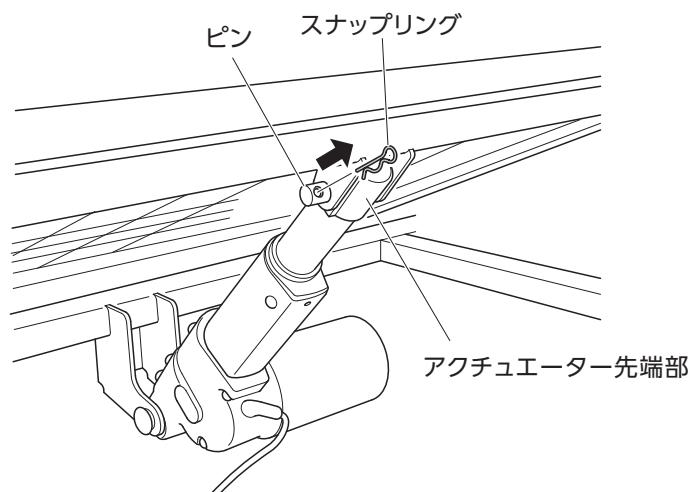

3 1人がリクライニング部を支えたままで、もう1人がピンを引き抜き、 アクチュエーター先端部をブラケットから取り外し、ゆっくりと床に置きます

※ピンの引き抜きが固い場合は、リクライニング部を動かすと外れやすくなります。

※アクチュエーターの先端部で床が傷つかないよう注意してください。

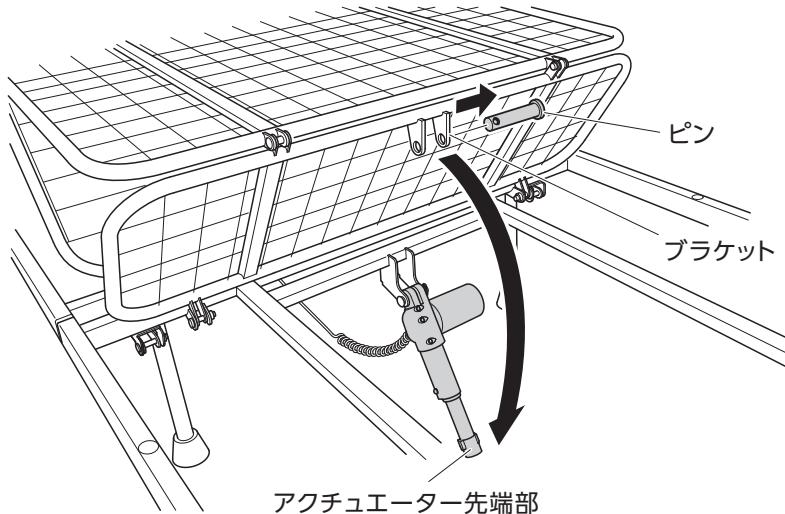

4 足部リクライニング部をゆっくり下ろします

⚠ 注意

- 取り外したスナップリング、ピンは大切に保管ください。
- 取り付け方法は取り外した逆の手順で行ってください。

🔧 故障かなと思ったら

修理に出す前に以下についてもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

コントローラーのボタンを押してもまったく動かない	<ul style="list-style-type: none">電源コードの電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていますか? 電源コードの電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。コンセントに電気が通っていますか? コンセントに他の器具を接続して電気が通っているか確認してください。コントローラーと電源コードのジャックがモーターからはずれていませんか? コントローラーのジャックを確実に差し込んでください。ACアダプターに電気が通っていますか? 電源コードとACアダプターを確実に差し込んでください。ACアダプターに電気が通っているときは、ACアダプターのランプが点灯します。
--------------------------	---


※上記以外の原因で動かなくなったときは、コントローラーの故障が考えられます。

下記の「コントローラーの外しかた」を参照してコントローラーを取り外し、コントローラーの修理をお買い求めの販売店に依頼してください。

コントローラーの外しかた

- 電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します。
- コントローラー側のジャックをまっすぐ引き抜きます。

※取り付けるときはジャックの向きに注意して確実に差し込んでください。

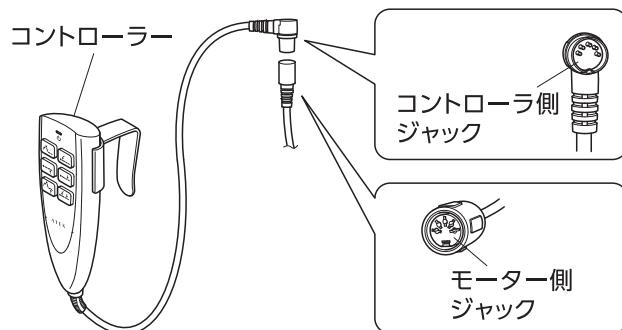

⚙️ 仕様

品名	電動リクライニングベッド
品番	AX-BEA709
製品重量	約 43kg
製品サイズ	(約)W1000 × L2050× H550 (mm)
マットレスサイズ	(約)W930 × L1950× t80 (mm)
マットレス面高さ	約400mm
電気定格	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	120W
通常使用荷重	90kg以下
素材	本体：鋼(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)、PP、PE、ABS、MDF(メラミン板貼り付け)、PU マットレス内部構造：ウレタンフォーム、固わた マットレス生地：ポリエステル(100%)
生産国	中国
製造元	株式会社 アテックス

memo

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「電動リクライニングベッド」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。

お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

品名 / 品番	電動リクライニングベッド / AX-BEA709		
お買上げ年月日*	年	月	日
お客様	お名前 ★ 様	販売店	保証期間 お買上日より1年 本体
	ご住所		TEL: () -

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷

- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社アテックス

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 九州物流センター
〒830-0222 福岡県久留米市城島町青木島438-1

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)